

Ръководство на потребителя за многофункционална термоподложка Beurer HK 60



I. ВКЛЮЧЕНО В ДОСТАВКАТА

- 1 бр. нагревателен елемент
- 1 бр. контролер
- 1 бр. Ръководство за употреба

Проверете целостта на опаковката при доставка на уреда и се уверете, че всички компоненти на устройството са налице. Преди употреба се уверете и че няма видими следи от повреда върху уреда или неговите компоненти. Ако имате съмнения, че устройството е с нарушена цялост, моля, свържете се с търговеца, от когото сте го закупили. Премахнете всички опаковъчни материали от устройството преди да го използвате.

Моля, прочетете внимателно тези инструкции за употреба и ги запазете за по-късна употреба, не забравяйте да ги направите достъпни за други потребители и спазвайте информацията, която съдържат.

II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА

HK 60 Cosy Grey е термоподложка с ергономична форма и лесно закрепване с велкро лента, идеална за корема и долната част на гърба. Тя разполага с три температурни настройки, които осигуряват бързо и успокояващо затопляне, подпомагащо облекчаването на напрежение. Меките влакна от флис правят материала особено приятен, дишащ и щадящ към кожата, а широката еластична лента гарантира удобно и стабилно носене при обиколка на талията до 102 см. Уредът е оборудван с контролер с LED бутон и осветени температурни степени, като предлага и бързо загряване за максимален комфорт. Вградената система за безопасност на Beurer следи температурата и при необходимост изключва уреда, а автоматичното изключване след 90 минути осигурява допълнителна защита и спокойствие при употреба. За да се осигури хигиенична употреба, термоподложката може да се пере в пералня при 30°C.

Този уред е предназначен само за затопляне на човешкото тяло. Подходящ е за универсална употреба, например върху корема, гърба, ставите или врата. Уредът може да бъде навит за използване и в областта на врата.


III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Устройството не трябва да се използва от хора, които не усещат топлина или от други уязвими лица, които може да не са в състояние да реагират на прегряване – например диабетици, лица с кожни увреждания в зоната на приложение (вследствие на заболяване или белези), както и след прием на болкоуспокояващи или алкохол.
- Това устройство не трябва да се използва от малки деца (0–3 години), тъй като те не могат да реагират на прегряване.
- Устройството може да се използва от деца над 3 и под 8 години само под наблюдение. В този случай контролерът винаги трябва да е настроен на най-ниската температурна степен.
- Уредът може да се използва от деца над 8-годишна възраст, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или с липса на опит и познания, само под наблюдение или след като са били инструктирани как да използват устройството безопасно, както и относно рисковете, свързани с употребата му.
- Уредът не е играчка – не позволявайте на децата да играят с него.
- Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен ако не са под наблюдение.
- Това устройство не е предназначено за използване в болници.
- Устройството е предназначено само за домашна или лична употреба и не бива да се използва за търговски цели.
- Не пробождайте устройството с карфици, игли или други остри предмети.
- Не използвайте уреда, когато е прегънат или намачкан.
- Не използвайте устройството, ако е мокро.
- Това устройство трябва да се използва само с контролер, посочен на етикета.
- Това устройство трябва да се включва само към мрежово напрежение, посочено на етикета.
- Ако устройството се използва в продължение на няколко часа, препоръчваме да зададете най-ниската температурна настройка на контролера, за да се избегне прегряване на тялото и съответно възможни изгаряния на кожата.

- Електрическите и магнитните полета, излъчвани от това устройство, могат да попречат на работата на вашия пейсмейкър. Въпреки това те са значително под допустимите граници: интензитет на електрическото поле: макс. 5000 V/m, интензитет на магнитното поле: макс. 80 A/m, магнитна индукция: макс. 0,1 милитесла. Затова се консултирайте с вашия лекар и с производителя на пейсмейкъра, преди да използвате това устройство.
- Не дърпайте, не усуквайте и не прегъвайте рязко кабелите.
- Не излагайте контролера и кабелите на пряка слънчева светлина.
- Когато устройството е включено:
 - не поставяйте остри предмети върху него,
 - не поставяйте източници на топлина, като грейки с гореща вода или подобни.
- Електронните компоненти в контролера се нагряват по време на работа. Поради това той не трябва да се покрива или поставя върху нагревателния елемент, когато устройството е включено.
- Оставяйте устройството да се охлади, преди да го приберете.
- За да избегнете силно намачкване на устройството, не поставяйте предмети върху него, докато се съхранява.
- Ако имате въпроси относно употребата на нашите устройства, моля, свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти.

IV. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

1. Щепсел за захранване
2. Контролер
3. Бутон за вкл./изкл.
4. Бутон за настройване на температурата
5. Осветен дисплей за температурни настройки
6. Конектор
7. Нагревателен елемент

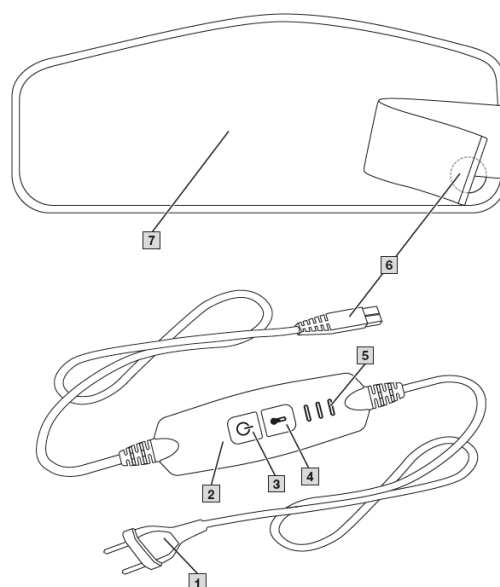

V. УПОТРЕБА



Безопасност

- Устройството е оборудвано със система за безопасност. Тази сензорна технология осигурява защита от прегряване по цялата повърхност на нагревателния елемент, като автоматично изключва устройството при повреда. Ако системата за безопасност е изключила устройството, контролерът вече няма да светне по никакъв начин, дори при включване.
- Моля, имайте предвид, че по съображения за безопасност устройството не може да се използва повторно след настъпване на повреда и трябва или да бъде изхвърлено или изпратено на посочения сервизен адрес.
- При никакви обстоятелства не свързвайте дефектния нагревателен елемент с друг контролер от същия тип. Това също би задействало постоянно изключване от защитната система в контролера.

Първоначална употреба


Уверете се, че нагревателният елемент не се нагъва или прегъва по време на употреба.

1. Най-напред свържете контролера **2** към нагревателния елемент, като поставите конектора **6**.
2. След това включете щепсела **1** в електрическия контакт.
3. Поставете уреда върху корема или гърба си. След това прекарайте дългата, еластична лента около тялото и закрепете уреда, като използвате велкро закопчалката.

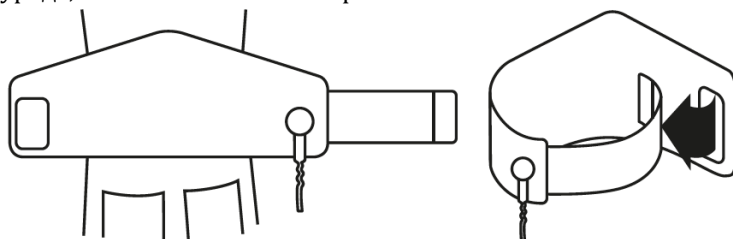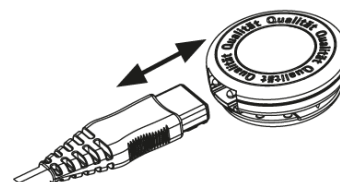

Използване като термоподложка за врата

- Първо свържете конектора.
- След това поставете уреда пред себе си върху маса така, че конекторът да е разположено горе вляво, а заострената страна на уреда да е насочена към тялото ви.
- Започвайки от заострената страна, стегнато навийте уреда по цялата му ширина.
- След това поставете напълно навития уред около врата си и го закрепете чрез велкро закопчалките.
- Изпъкналата еластична лента може да бъде пхната под уреда отпред.

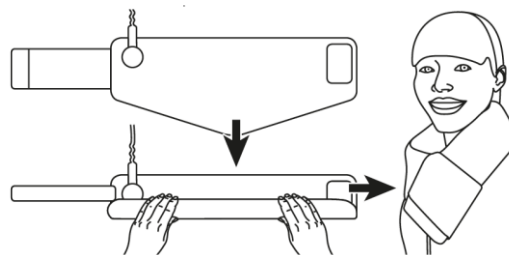

Важно: Уверете се, че уредът е навит плътно и изцяло. В противен случай защитната система може необратимо да изключи уреда!

Включване

Натиснете бутона за вкл./изкл. [3]. При включване дисплеят с температурните настройки [5] светва. Последователност на превключване: 3-1-2-3-1...

Настройка на температурата

За да промените температурата, натиснете бутона за настройване на температурата [4].

Степен 1: минимална топлина;

Степен 2: средна топлина;

Степен 3: максимална топлина.

Бележка: Най-бързият начин за затопляне на устройството е първоначално да се избере най-високата температурна степен.

Бележка: Устройството разполага с функция за бързо загряване, която позволява то да се загрее бързо през първите 10 минути.

Автоматично изключване

Това устройство е оборудвано с функция за автоматично изключване. Тя прекъсва подаването на топлина приблизително 90 минути след началото на употреба. За да рестартирате устройството, натиснете бутона за вкл./изкл. [3]. След около 5 секунди е възможно отново да го включите.

Изключване

За да изключите устройството, натиснете бутона за вкл./изкл. [3]. Дисплеят с температурните настройки ще изгасне.

Бележка: Ако устройството не се използва, натиснете бутона за вкл./изкл. [3], за да го изключите, и извадете щепсела от контакта. След това откачете контролера [2] от нагревателния елемент, като издърпате конектора [6].

VI. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Почистване

Преди почистване винаги първо изваждайте щепсела от контакта. След това откачайте контролера от нагревателния елемент, като издърпвате конектора. Контролерът никога не бива да влиза в контакт с вода или други течности, тъй като това може да го повреди.

- За почистването на контролера използвайте суха кърпа без власинки. Не използвайте химически или абразивни почистващи препарати.
- Малки петна по нагревателния елемент могат да бъдат премахнати с влажна кърпа и, ако е необходимо, с малко течен препарат за деликатно пране.

Моля, обърнете внимание, че нагревателният елемент не трябва да се почиства с химикали, да се изцежда, да се суши в сушилня, да се прекарва през валик или да се глади.

- Нагревателният елемент може да се пере в пералня, но само с добре затворена велкро закопчалка.
- Задайте на пералнята програма за особено деликатно пране при 30°C (програма за вълна). Използвайте препарат за деликатно пране и го дозирайте според инструкциите на производителя.

- Веднага след изпиране оформете нагревателния елемент в оригиналните му размери, докато е още влажен, и го разстелете хоризонтално върху сушилник за дрехи, за да изсъхне.
- Не използвайте щипки или други подобни предмети, за да прикрепяте нагревателния елемент към сушилника за дрехи. В противен случай нагревателният елемент може да се повреди.
- Не свързвайте контролера към нагревателния елемент, преди конекторът и самият нагревателен елемент да са напълно сухи.

Важно: Никога не включвайте устройството, за да го изсушите! Това може да доведе до токов удар.

Съхранение

Ако не възнамерявате да използвате устройството за по-дълъг период от време, препоръчваме да го съхранявате в оригиналната му опаковка. За тази цел откачете контролера от нагревателния елемент, като издърпате конектора.

Ремонти

Само специализиран персонал може да извършва ремонт на електрически уреди. При никакви обстоятелства не отваряйте и не се опитвайте да ремонтирате устройството (включително аксесоарите) сами. Това може да доведе до неправилна работа на уреда и да създаде сериозен риск за безопасността. За ремонт, моля, свържете се с отдел „Обслужване на клиенти“ или с оторизиран търговец. Неспазването на тези указания води до анулиране на гаранцията.

VII. СЪПКИ ПРИ ПРОБЛЕМИ

Проблем	Температурните настройки не светят, въпреки че: – контролерът е правилно свързан с нагревателния елемент, – щепселът е включен в работещ контакт, – е натиснат бутонът за вкл./изкл. 3.
Възможна причина	Системата за безопасност е изключила устройството за постоянно.
Решение	Изпратете нагревателния елемент и контролера за сервизно обслужване.

VIII. РЕГУЛАТОРНА ПОЛИТИКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Поради екологични съображения не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране. Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). При въпроси относно правилното изхвърляне на устройството, моля, обърнете се към съответните местни власти.



IX. ГАРАНЦИЯ/СЕРВИЗ

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта.

Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Beurer не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Производител: Beurer GmbH

Адрес: Soeflinger Strasse 218

89077 Ulm, Germany

Телефон: +497 313 9890

Имейл: customerservice@beureruk.com

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.