

Ръководство на потребителя за масажор против целулит Beurer SM 100

1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- 1 бр. масажор против целулит
- 1 бр. микро-USB кабел за захранване

2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА

- Целулитът представлява дребни дупчици, които се появяват най-често върху кожата на бедрата, горната част на ръце и седалището. Той се появява най-често при жените заради женския хормон естроген.
- Женската кожа е по-мека и не упражнява достатъчно силен натиск върху натрупаните мастни клетки под кожата и те „излизат“ на повърхността под формата на целулит.
- Целулитът не е медицински проблем, обикновено не води до физически неразположения, а е изцяло козметичен проблем.
- Този уред увеличава микроциркулацията в тъканите чрез вибрация.

3. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Уредът е предназначен за домашна употреба, а не за търговски и медицински цели.
- Уредът може да се използва от хора с намалени умствени способности и деца над 8 години само под надзор или след като са били инструктирани за безопасното използване на уреда и са напълно наясно с произтичащите от това рискове при употреба.
- Уредът не е играчка – пазете го далеч от деца!
- Почистването и поддръжката на този уред не бива да се извършва от деца без родителски контрол.
- Това не е медицински уред, а уред за масаж срещу целулит.
- Дръжте опаковката на устройството далеч от обсега на деца – риск от задушаване!
- Преди първоначална употреба се уверете, че устройството не е повредено – ако установите повреда, моля обърнете се към търговеца на уреда.
- Преди всяка употреба проверете за следи от повреди върху уреда и кабела и ако установите такива не ги използвайте. Потърсете оторизиран техник.

- Използвайте уреда само с предоставените аксесоари.
- Уредът трябва да се използва само по предназначение и по описания в тези инструкции за употреба начин. Всяка неправилна употреба може да бъде опасна. Производителят не носи отговорност за щети в резултат на неуместна или неправилна употреба.
- Не използвайте уреда при бременност, докато шофирате, докато сте в кола, по време на сън, върху животни, върху лицето си, върху слабините си или по време на дейност, където неочаквана реакция може да бъде опасна.
- Не използвайте уреда преди или след излагане на силно слънце – увеличена възможност за изгаряне!
- Не използвайте уреда при нарушени нива на осъзнаване (прием на лекарства или алкохол).
- **Преди употреба се консултирайте с вашия лекар в следните случаи:**
 - Ако се възстановявате след операция на горната част на тялото или страдате от сериозно заболяване.
 - Ако имате пейсмейкър, слухов апарат или друг метален имплант.
 - В случаи на треска, разширени вени, тромбоза, флебит, жълтеница, диабет, нервни разстройства (например ишиас) или остри възпаления.
 - При болки с неустановен произход.
- Не използвайте уреда върху рани или върху раздразнена кожа.
- Не използвайте уреда повече от 15 минути – риск от прегряване. Уредът се изключва автоматично след 15 минути работа.
- Не отваряйте или ремонтирайте устройството сами. В противен случай перфектното му функциониране вече не е гарантирано, а гаранцията на уреда става невалидна.
- В случаи на повреда ремонтирайте устройството само при оторизиран техник.


Относно батериите:


- Ако кожата или очите ви влязат в контакт с течност от батерия, измийте обилно с вода и потърсете лекарска помощ.
- Пазете батериите далече от деца поради риск от поглъщане.
- Съблюдавайте + и – полярността на батериите.
- Не разглобявайте, срязвайте или смачквайте батериите.
- Не хвърляйте батериите в огън – опасност от експлозия.
- Използвайте само зарядни споменати в тези инструкции.

- Батериите трябва да се заредят напълно преди да бъде използвано устройството за първи път. Следвайте указанията за зареждането им внимателно (виж т. 5 Подготовка за работа).
- За максимално добра работа на батериите, моля зареждайте ги изцяло поне два пъти в годината.

4. ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО

1. Микро USB връзка
2. Дръжки
3. Бутон ВКЛ/ИЗКЛ
4. Светлина за вид функция
5. Четири повърхности за процедури (гладка, на буци, остър ръб и със затъпен ръб).

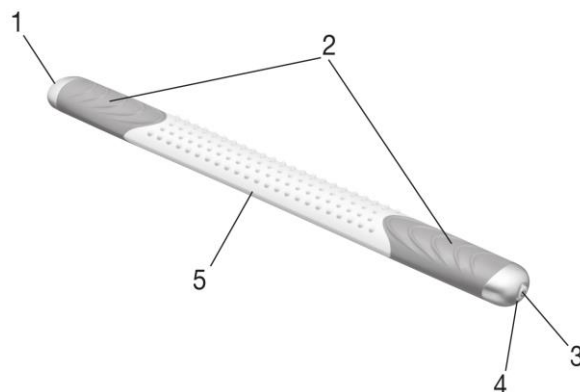

Светлинен статус за работа 	Уредът се зарежда (кабелът за захранване е сложен)
Светлината мига в кръг	Зареждането се извършва
Светлината свети постоянно	Уредът е зареден
Лявата и дясна светлина светят една след друга	Слаба батерия

5. РАБОТА С УСТРОЙСТВОТО

Подготовка за работа

- Преди да използвате уреда за пръв път заредете батерията му за поне 3.5 часа.

- Сложете кабела за зареждане в уреда и свържете уреда в токовата мрежа. Ако желаете може да заредите уреда и през USB порта на своя компютър или таблет.

Figure 1


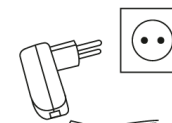


Figure 2

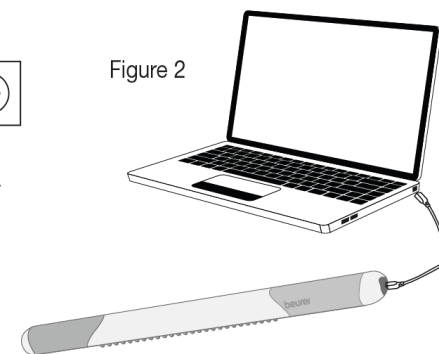

- Преди да използвате уреда е хубаво да сложите масажно олио върху кожата си.
- Не използвайте кремове, които имат силен охлаждащ или затоплящ ефект.

Работа с устройството:

- Включете уреда чрез бутон ВКЛ/ИЗКЛ. Автоматично е избрана първата настройка за вибрация. Този уред има 4 настройки на вибрация:



Действие	Настройка на вибрация
Първо натискане на бутона	Уредът се включва и светлината за функция светва синьо. Ниска степен на вибрация.
Втора натискане на бутона	Втората светлина на уреда се включва и светва в синьо. Средна степен на вибрация.
Трето натискане на бутона	Третата светлина светва в синьо. Силна степен на вибрация.
Четвърто натискане на бутона	Четвъртата светлина светва в синьо. Вибрация на периодични импулси.
Пето натискане на бутона	Уредът се изключва и спира да свети.

- По време на употреба дръжте уреда с две ръце.
- За оптимални резултати използвайте уреда на всеки два дни.

- Възможно е третираната кожа да се зачервени силно и да се появят синини – това е напълно нормално и показва, че сте използвали уреда правилно.

Употреба върху външната част на бедрата:

- Сложете крака си върху стол или друга повърхност докато сте в изправено положение.
- Изберете желаната сила на вибрация.
- Фаза 1: Използвайте уреда с повърхността на буци, като правите малки, бързи кръгови движения и не натискате кожата си прекалено силно (за около 3 минути).
- Фаза 2: Използвайте уреда с повърхността на буци, като правите дълбоки, бавни кръгови движения и натискате кожата повече (за около 3 минути).
- Фаза 3: Тази фаза има за цел да махне натрупаната вода от тялото ви. Движете уреда към сърцето си с умерен натиск. Когато правите това, започнете движението в горната външна част на бедрото и бавно преместете началната точка надолу към коляното. Един ход трябва да бъде приблизителна дължина 10 см. Извършете този процес 5 пъти, движейки се по външната страна на бедрото, докато стигнете до областта на коляното. В края преместете устройството върху цялата външна част на бедрото веднъж.

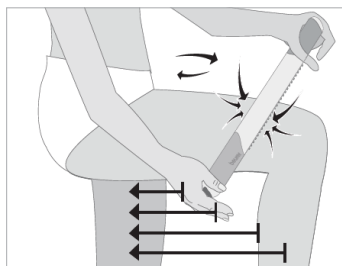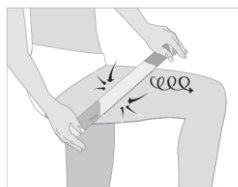


Употреба върху задната част на бедрата:

- Сложете крака си върху стол или друга повърхност докато сте в изправено положение.
- Изберете желаната сила на вибрация.
- Фаза 1: Използвайте уреда с повърхността на буци, като правите малки, бързи кръгови движения и не натискате кожата си прекалено силно (за около 3 минути).



- Фаза 2: Използвайте уреда с повърхността на буци, като правите дълбоки, бавни кръгови движения и натискате кожата повече (за около 3 минути).
- Фаза 3: Тази фаза има за цел да махне натрупаната вода от тялото ви. Движете уреда към сърцето си с умерен натиск. Когато правите това, започнете движението в горната задна част на бедрото (задните части) и бавно преместете началната точка надолу към коляното. Един ход трябва да бъде приблизителна дължина 10 см. Извършете този процес 5 пъти, движейки се по задната страна на бедрото, докато стигнете до областта на коляното. В края преместете устройството върху цялата задна част на бедрото веднъж.

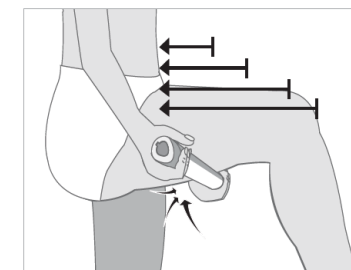

6. ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ

- Почистете уреда с влажна или суха кърпа, без да използвате абразивни почистващи препарати.
- Пазете уреда от прах, вода, топлина, пряка слънчева светлина, химикали, резки температурни промени и електромагнитни полета. Не изпускайте уреда.
- Преди да изхвърлите устройството в официален пункт за рециклиране трябва да сте изхвърлили батерии му. Свалете капака на зарядното с помощта на отвертка и разхлабете 4-те винта на капака. Извадете батерията. Изхвърлете използваната батерия на място за събиране на батерии.

7. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ



Уредът отговаря на изискванията на приложимите европейски директиви.



Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране, в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



По закон празните батерии трябва да се изхвърлят на специално обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника.

Кодовете по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:

Pb = Батерията съдържа олово

Cd = Батерията съдържа кадмий

Hg = Батерията съдържа живак



Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.

Производителят не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

8. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта.

Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Вeueг не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.