

Ръководство на потребителя за антицелулитен масажор Beurer CM 51



I. ВКЛЮЧЕНО В ДОСТАВКАТА

- 1 бр. антицелулитен масажор Beurer CM 51
- 1 бр. захранващ адаптер с кабел
- 1 бр. Ръководство за употреба

Проверете целостта на опаковката при доставка на уреда и се уверете, че всички компоненти на устройството са налице. Преди употреба се уверете и че няма видими следи от повреда върху уреда или неговите компоненти. Ако имате съмнения, че устройството е с нарушена цялост, моля, свържете се с търговеца, от когото сте го закупили. Премахнете всички опаковъчни материали от устройството преди да го използвате.

Запазете това ръководство за бъдеща употреба. Ако предадете устройството на друг човек, моля, предоставете му и това ръководство за употреба.

II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА

Масажорът Beurer CM 51 е ефективно устройство за антицелулитен масаж, което стимулира кръвообращението и подобрява еластичността на кожата. С ергономичния си дизайн и регулируемата дръжка, той осигурява комфорт при употреба у дома. При редовна употреба, този масажор може да помогне за видимо стягане на кожата и подобряване на външния ѝ вид.

Уредът е предназначен за домашна употреба, а не за търговски или медицински цели. Този продукт не представлява медицинско средство и не следва да се използва вместо лечение, предписано от лекар. Устройството трябва да се използва само по предназначение и съгласно указанията в това ръководство за употреба, като се използват единствено принадлежностите, включени в доставката. Всяка форма на неправилна употреба може да бъде опасна. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилна или некоректна употреба. Не използвайте устройството, ако едно или повече от изброените предупреждения и бележки за безопасност се отнасят за вас. Ако не сте сигурни дали устройството е подходящо за вас, моля, консултирайте се с вашия лекар.

Противопоказания:

- Не използвайте устройството, ако страдате от медицинска аномалия или имате някакво нараняване в зоната, която ще масажирате (например дискова херния или отворени рани).
- Никога не използвайте масажора в областта на сърцето при лица с поставен пейсмейкър и винаги се консултирайте с лекар, преди да използвате уреда върху други части на тялото на човек с пейсмейкър.
- Не използвайте масажната функция на уреда върху подута, изгорена, възпалена или наранена кожа и части от тялото.
- Не използвайте уреда върху порезни рани, капиляри, разширени вени, акне, купероза, херпес или други кожни заболявания.
- Не използвайте уреда по време на бременност.
- Не използвайте устройството върху главата или лицето (например върху очите).
- Не използвайте уреда върху ларинкса, в областта на слабините или други особено чувствителни части на тялото.
- Не използвайте устройството върху гръбначния стълб или при зони, където костта се намира непосредствено под кожата.
- Не използвайте устройството за масаж на краката.
- Не използвайте устройството, докато спите.
- Не използвайте устройството върху животни, включително домашни любимци.
- Не използвайте устройството след прием на лекарства или алкохол (намалена когнитивна способност!).
- Не използвайте устройството, докато се намирате в превозно средство.

- Преди да използвате уреда, следва да се консултирате с вашия лекар, особено в следните случаи:
 - ако страдате от тежко заболяване или се възстановявате от операция на горната част на тялото,
 - ако страдате от тромбоза,
 - ако страдате от диабет,
 - ако изпитвате болка с неясен произход.

III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Основни предупреждения:


- Внимание – опасност от задушаване! Дръжте опаковъчните материали и приставките далеч от деца.
- Внимание – опасност от токов удар! Не допускайте контакт на устройството, захранващия адаптер и кабела с вода или други течности. Никога не докосвайте устройство, което е паднало във вода, а незабавно изключете адаптера от електрическия контакт.
- Уредът не е играчка — не позволявайте на децата да играят с него.
- Уредът може да се използва от деца над 8-годишна възраст, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности, само под наблюдение и след като са инструктирани относно рисковете, свързани с употребата му.
- Може да възникне риск от пожар, ако устройството се използва неправилно или ако инструкциите в това ръководство не се спазват.
- Никога не оставяйте уреда без надзор, докато работи, особено ако наблизо има деца.
- Почистването и поддръжката на този уред не бива да се извършва от деца без родителски контрол.
- Използвайте устройството само с предоставения захранващ адаптер и при мрежово напрежение, посочено на адаптера.
- Никога не използвайте уреда по време на гръмотевична буря.
- Никога не използвайте устройството под покривало, като одеяло, възглавница и други.
- Никога не използвайте устройството в близост до бензин или други силно запалими вещества.
- Работете с устройството само в сухи и закрити помещения.
- Никога не използвайте уреда във ваната или в сауна.

Общи предпазни мерки:

- Преди употреба се уверете, че устройството и неговите приставки нямат видими повреди. При съмнение не използвайте уреда, а се свържете с вашия търговец или с оторизиран сервизен център.
- Ако уредът се повреди или не работи правилно, веднага го изключете и извадете адаптера от контакта.
- Никога не дръпвайте кабела, за да изключите уреда, и не носете уреда, държейки го за самия кабел. Пазете кабелите от горещи повърхности и не ги огъвайте или усуквайте.
- Дръжте уреда далеч от остри или заострени предмети.
- Ако устройството е изпускано или е претърпяло други повреди, то не трябва да се използва повече.
- Изключвайте уреда след всяка употреба и преди почистване.
- Използвайте устройството само с предоставените към него аксесоари.
- Пазете устройството и неговите приставки от удари, прах, химикали, рязка смяна на температурата, електромагнитни полета и близки източници на топлина (фурни, отоплителни уреди).
- Ако захранващият кабел на това устройство е повреден, той трябва да бъде изхвърлен. Ако кабелът не може да бъде отстранен, трябва да се изхвърли цялото устройство.
- Не поставяйте предмети в отворите на устройството или в неговите движещи се части. Уверете се, че всички движещи елементи могат да се движат свободно по всяко време.
- Внимавайте косата ви да не се заплита във въртящите приставки по време на работа с уреда. За да се предпазите, използвайте ластик за коса.
- Не притискайте която и да било част от тялото си, особено пръстите си, между подвижните масажирани елементи или техните държачи в устройството.
- Уредът не е предназначен за използване в търговски помещения.

IV. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

1. Регулируема дръжка за ръка
2. Бутон за включване/изключване и регулиране на скоростта
3. Масажни ролери
4. Захранващ адаптер с кабел

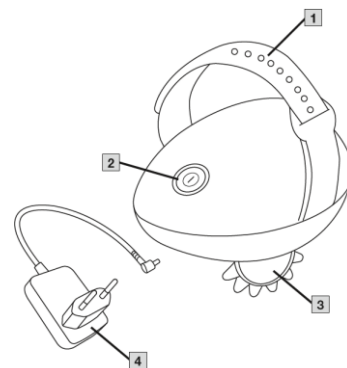

V. УПОТРЕБА

Притиснете масажора внимателно към частта от тялото, която желаете да масажирате. Ако почувствате болка или дискомфорт, прекратете масажа, променете позицията си или натиска. Не притискайте и не поставяйте части от тялото си – особено пръстите – между въртящите се масажни ролери.

Работа с уреда чрез бутона за включване/изключване и регулиране на скоростта [2]:

При първо натискане на бутона: уредът се включва и масажните ролери започват да се въртят.

При второ натискане на бутона: уредът преминава на по-висока скорост.

При трето натискане на бутона: уредът се изключва и масажът приключва.

Не използвайте масажора за повече от 15 минути. Прекалено дългата употреба може да доведе до свръхстимулиране на мускулите и да предизвика напрежение вместо отпускане.

VI. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Почистване:

- Преди почистване изключете захранващия адаптер от електрическия контакт и го откачете от уреда.
- Масажните ролери могат да бъдат свалени чрез внимателно, но силно издърпване. Ролерите могат да се почистват под течаща вода с мека четка и малко препарат за съдове. Уредът може да се почиства с мека, леко влажна кърпа.
- Не почиствайте устройството в съдомиялна машина.
- Не използвайте отново устройството или приставките преди всички компоненти да са изсъхнали напълно.

Поддръжка:

Ако не планирате да използвате устройството за дълъг период от време, препоръчваме да го съхранявате в оригиналната му опаковка на сухо място, като се уверите, че върху него не са поставени допълнителни предмети.

Ремонти:

- Никога не се опитвайте да ремонтирате устройството сами!
- Само специализиран персонал може да извършва ремонт на електрически уреди. При никакви обстоятелства не отваряйте и не се опитвайте да ремонтирате устройството сами. Това може да доведе до неправилна работа на уреда и да създаде сериозен риск за безопасността. За ремонт, моля, свържете се с отдел „Обслужване на клиенти“ или с оторизиран търговец. Неспазването на тези указания води до анулиране на гаранцията.

VII. РЕГУЛАТОРНА ПОЛИТИКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Поради екологични съображения не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране. Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Опаковката следва да бъде изхвърлена по екологично съобразен начин. При въпроси относно правилното изхвърляне на устройството, моля, обърнете се към съответните местни власти.



VIII. ГАРАНЦИЯ/СЕРВИЗ

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта.

Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Beurer не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Производител: Beurer GmbH

Адрес: Soeflinger Strasse 218

89077 Ulm, Germany

Телефон: +497 313 9890

Имейл: customerservice@beureruk.com

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.