

Ръководство на потребителя за уред за микродермабразия Beurer FC 100



1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА

- Чрез технологията микродермабразия този уред на Beurer ви дава възможността за професионален пилинг на лицето ви в домашни условия.
- Висококачественото сапфирено покритие се използва за нежно отстраняване на излишните кожни клетки, а модерната вакуумна технология забележимо подобрява текстурата и кръвообращението на кожата ви.
- Освен това процедурите с Beurer FC 100 стимулират обновяването на клетките за по-фин и гладък тен.

2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ


- Уредът е предназначен само за домашна употреба на закрито. Той не е предназначен за търговски цели.
- Уредът не трябва да се използва от лица под 18 години.
- Дръжте уреда далеч от достъпа на деца – уредът не е играчка. Деца не бива да почистват уреда без надзор от възрастен.
- Дръжте опаковката на уреда далеч от деца – риск от задушаване!
- Устройството да не се използва от деца и хора с намалени физически, сензорни или умствени способности без надзора на

възрастен или преди да са инструктирани за безопасното използване на уреда и са напълно наясно с произтичащите от това рискове при употреба.

- Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се смени, а ако не може да се смени, уредът трябва да се изхвърли.
- Уредът трябва да се използва само върху лицето (без зоната около очите и устата).
- Не използвайте уреда върху животни.
- Уредът трябва да се използва само по предназначение и според инструкциите за употреба на производителя. Производителят не носи отговорност за повреди или наранявания, причинени от неправилна употреба.
- Преди употреба проверете уреда и приставките му за видими повреди. Ако установите такива, моля потърсете помощ от търговеца на уреда.
- Дръжте захранващия адаптер далеч от вода!
- Не използвайте този уред във вода, във вана, под душа, в близост до вода или в много влажна среда – риск от токов удар!
- Ако уредът падне във вода не го вадете – риск от токов удар! Извадете кабела за захранване от контакта веднага.
- Не изпускайте уреда и не го удряйте.
- Внимавайте кабелът за захранване да не се прекъсва или огъва.
- Кабелът и адаптера не бива да имат контакт с вода, пара или да са във влажна среда.
- Използвайте уреда само в сухи помещения.
- Не използвайте уреда върху наранена кожа, в зоната на очите и устата, открити рани, върху други части на тялото, освен върху лицето, при кожно заболяване или раздразнена кожа (херпес, разширени вени), при рак на кожата, веднага след слънчева баня, при приемане на лекарства със стероиди или лекарства, които разреждат кръвта.
- Не използвайте уреда, ако имате множествена склероза, диабет или автоимунно заболяване
- Уредът трябва да се използва само в токова мрежа с подходящо токово напрежение.
- Не поправяйте уреда сами. Поправки трябва да се извършват само от оторизиран технически персонал. В противен случай рискувате да се нараните. Всяка поправка от неотризиран персонал води до нулиране на гаранцията.

3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

1. Огледало
2. Приставка за прецизни процедури с фино сапфирено покритие, подходяща за прецизни процедури на малки зони (например носа).
3. Голяма приставка с фино сапфирено покритие, подходяща за чувствителна кожа.
4. По-груба приставка с по-грубо сапфирено покритие, подходяща за интензивни процедури на проблемни зони.
5. Кутия за съхранение с филтри за еднократна употреба
6. Уред FC 100
7. Дисплей на нивото на интензивност (1-5)
8. Бутон +/- за настройка на нивото на интензивност
9. Бутон за отваряне на кутията
10. Бутон за ВКЛ./ИЗКЛ.
11. Тръбичка

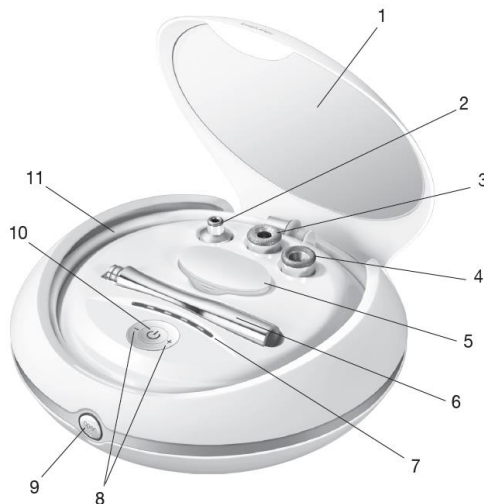



ВАЖНО:

- Преди употреба се уверете, че лицето ви е чисто, сухо без грим, пудра или кремове.
- 24 часа преди да използвате уреда си направете кожен тест. Третирайте малка зона на врата си на най-ниската степен на работа. Ако след 24 часа зоната е зачервена или изпитвате дискомфорт – не използвайте уреда!
- Не използвайте уреда повече от веднъж седмично. Ако кожата ви не е чувствителна може да използвате уреда и два пъти седмично, но задължително трябва да изчакате 48 часа между процедурите.
- Ден преди и ден след употреба избягвайте дейност, която ви кара да се потите силно (например сауна, солариум или излагане на слънце).

- Веднага след употреба кожата може да се зачерви леко, а в много редки случаи може да се появят малки петна кръв под кожата.
- След употреба на уреда измийте лицето си с вода и не се излагайте на слънце.



4. РАБОТА С УРЕДА

1. Свържете захранващия адаптер към устройството и включете адаптера в контакта.
2. Натиснете бутона, за да отворите кутията (Фиг.1)
3. Сложете филтър за еднократна употреба върху края на тръбичката (Фиг.2).

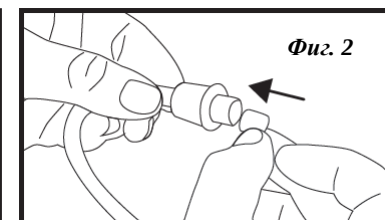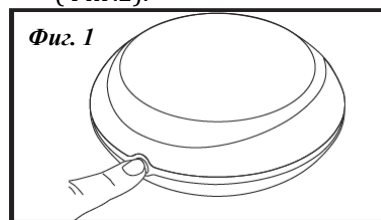


Свържете края на тръбичката към устройството за микродермабразия (Фиг. 3)

4. Сложете приставката, която желаете да използвате върху върха на устройството (Фиг.4)

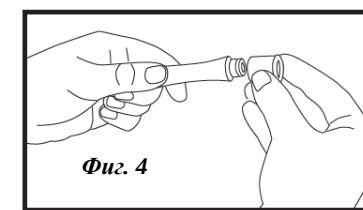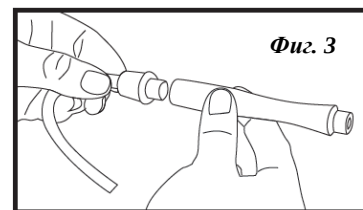

5. Натиснете бутона за ВКЛ./ИЗКЛ. – уредът започва да работи на най-ниската си степен, а дисплеят за нивото на интензивност светва.
6. Допрете уреда върху лицето си като внимавате да не минавате върху едно и също място два пъти и започнете да го движите.
7. Ако желаете може да увеличите нивото на интензивност чрез бутона +/-
8. **БЕЛЕЖКА:** Не натискайте уреда прекалено силно към кожата си – не бива процедурата да е неприятна или болезнена. Леко зачервяване на кожата след процедура е нормално.

9. За да завършите процедурата натиснете бутон ВКЛ/ИЗКЛ и извадете адаптера от контакта.
10. След всяка употреба сменяйте филтъра за еднократна употреба. Махнете тубичката от уреда и махнете употребения филтър чрез пинсети.

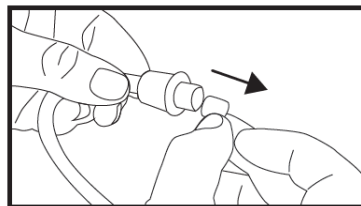

5. ЗОНИ НА ТРЕТИРАНЕ ВЪРХУ ЛИЦЕТО

По време на процедура се уверете, че кожата на лицето ви е опъната. Може да дръпнете кожата си леко нагоре или надолу чрез свободната си ръка.

Чело:

Движете уреда от центъра на челото към краищата му. Не минавайте върху едно и също място на кожата два пъти.



Слепоочия:

Движете уреда от очите навън към косата си. Уверете се, че уредът е на поне 1 см от очите ви.



Нос:

Движете уреда в средата на носа си отгоре надолу. Повторете от лявата и от дясната страна на носа.



Бузи:

Движете уреда от носа навън по бузите си.



Около устата:

Движете уреда от центъра на кожата над горната ви устна наляво и надясно посока навън. Когато третирате кожата под долната ви устна движете уреда наляво и надясно посока нагоре.



6. ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

Изключвайте уреда преди почистване и го вадете от контакта.

Почистване на уреда и зарядното

- Никога не потапяйте уреда във вода или други течности.
- След всяка употреба дезинфекцирайте приставките със стандартен дезинфектант.
- След всяка употреба сменяйте филтрите за еднократна употреба.
- Почиствайте уреда със суха кърпа. Не използвайте абразивни почистващи препарати.
- Пазете уреда от: високи температури (печки, огън), огън, вода, прах, мръсотия, химикали и големи температурни амплитуди.

7. РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

Може да поръчате следните резервни части под каталожен номер:

20 бр. филтъра за еднократна употреба	163.546
1 бр. приставка за прецизни процедури	163.557
1 бр. по-груба приставка	163.556
1 бр. голяма приставка	163.555

8. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ



Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Отнесете го в пункт за събиране или рециклиране, в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Използвайте този уред само в закрити помещения.



Уредът отговаря на приложимите европейски и национални директиви.



Изхвърлете опаковката по начин, опазващ околната среда.



Този уред не бива да се използва във вода, в близост до вода или в много влажна среда. Риск от токов удар!

9. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта.

Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Веуегер не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за уреда ще намерите на www.polycomp.bg.