

Ръководство на потребителя за термоподложка Beurer FW 20

I. Включено в доставката:

- 1 бр. подгревател за крака Beurer FW 20
- 1 бр. вълнена подплата
- 1 бр. устройство за управление

** Прочете тези инструкции внимателно и ги запазете за по-нататъшна употреба. Уверете се, че ако дадете това устройство на друг ще им предадете и тези инструкции за употреба.*

** Проверете целостта на опаковката при доставка на уреда и се уверете, че всички компоненти на устройството са налице. Преди употреба се уверете, че няма видими следи от повреда върху уреда или неговите компоненти. Ако имате съмнения, че устройството е с нарушена цялост, моля свържете се с търговеца от когото сте го закупили*

II. Полезни съвети и инструкции за безопасност:


- Преди употреба прочетете тези инструкции внимателно – в противен случай може да пострадате в следствие на неправилна употреба на този уред (токов удар, изгаряния). Ако дадете този уред на някой друг, моля предайте им и тези инструкции за употреба.
- Този уред не бива да се използва от хора с намалена чувствителност към топлина – диабетици, хора с кожни промени, свързани със заболявания, хора с белези на кожата в зоната на третиране и хора, които са приели алкохол или болкоуспокоителни.
- Този уред не бива да се използва от деца между 0 – 3 години, поради по-ниската им чувствителност към топлина.
- Този уред не може да се използва от малки деца (3-8 години), освен ако настройките му не са зададени от родител или отговорен възрастен и на детето са дадени адекватни инструкции как да използва уреда безопасно.
- Уредът може да се използва от деца над 8-годишна възраст и хора с намалени физически, сензорни или умствени способности само под надзор и след инструктаж за опасностите от употреба.
- Уредът не е играчка – дръжте го далеч от деца.
- Уредът не бива да се използва или да се почиства от деца, ако не са в присъствието на възрастен.
- Този уред не е предназначен за употреба в болници.
- Този уред е предназначен за домашна употреба, не за търговски цели или за употреба в болници.
- Не използвайте този уред върху животни!
- Не използвайте този уред с обувки.
- Не използвайте този уред прегънат или сгънат.
- Не използвайте уреда, ако е мокър.
- Този уред трябва да се използва само свързан към подходящо захранване, което е уточнено на етикета.
- Електрическите и магнитни полета, излъчвани от този уред могат да повлияят функцията на пейсмейкърите. Независимо от това те са в допустимите граници: сила на електрическо поле: макс. 5000 V/m, сила на магнитното поле: макс. 80 A/m, плътност на магнитния поток: макс. 0,1 милитесла. Моля консултирайте се с лекар и с производителя на вашия пейсмейкър преди да използвате този уред.
- Не прегъвайте и не усуквайте кабели на това устройство.
- Проверявайте уреда редовно за следи от повреда. Ако откриете такива не го включвайте преди оторизиран техник не го прегледа и не го поправи.
- Ако не е позициониран правилно има риск от оплитане, задушаване и спъване в кабела. Потребителят трябва да се увери, че кабелът е прекаран правилно.
- Пазете кабели от горещи повърхности, остри предмети, нараняване, прегъване и усукване.
- Проверявайте уреда редовно за следи от повреда. Ако откриете такива не го включвайте преди оторизиран техник не го прегледа и поправи.
- В никакъв случай не отваряйте или ремонтирате уреда сами, тъй като перфектната му работа вече не може да бъде гарантирана. Всеки опит за самостоятелна поправка прави гаранцията невалидна.

- Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се смени от оторизиран техник. Ако не може да се смени, целият уред трябва да бъде изхвърлен.
- Уредът е предназначен за употреба само върху хора в зоната на краката. Той не е заместител на лекарска помощ.
- Когато уредът е включен:
 - Не поставяйте остри предмети върху него;
 - Не поставяйте източници на топлина като топли бутилка с вода, отоплителни подложки и т.н. върху него.
- Електронните компоненти на устройството за управление се загряват, когато уредът се използва. Заради това устройството за контрол никога не бива да бъде покрито или да бъде поставено върху самия уред.
- Предназначена употреба:
 - Този уред е предназначен само за загряване на човешки крака.
 - **Бележка:** Този уред е подходящ само за крака с размери до номер 47 (европейски).

	Не бодете и пробождайте уреда.		Не избелвайте с белина.
	Не сгъвайте и прегъвайте уреда.		Не центрофугирайте.
	Да не се използва от деца под 3-годишна възраст.		Не носете на химическо чистене.
	Текстилът, използван за това устройство, отговаря на изискванията на Oeko-Tex Standard 100.		Не гладете.
	Перете на програма за деликатни тъкани на 30°C.		

III. Описание на уреда:

1. Щепсел за захранване
2. Кабел за захранване
3. Устройство за управление
4. Осветен дисплей за настройка на температура
5. Плъзгач се бутона за Вкл./Изкл. и настройка на температурата

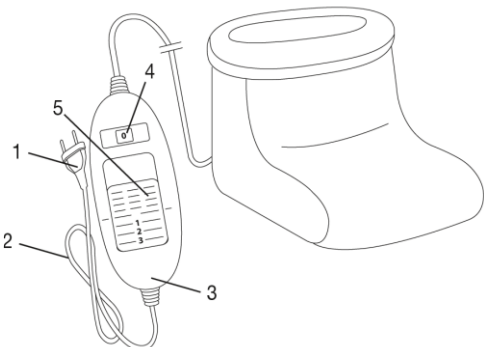

IV. Употреба:

Внимание:

- **ВАЖНО:** Този уред има защита срещу прегряване и в случай на прекомерно повишение на температурата по време на работа той се изключва автоматично. Ако автоматичната защита се е включила, температурните настройки (4) вече не светят, когато включите уреда.
- Имайте предвид, че от съображения за безопасност уредът вече не може да работи след включване на автоматичната защита и трябва да потърсите оторизиран техник.

Употреба:

- Свържете захранващия щепсел в контакта.
- За да включите уреда плъзнете бутона за ВКЛ./ИЗКЛ. и за настройка на температура към позиция 1, 2 или 3. Температурните настройки (4) се осветяват.
- Температурните нива са 4: Ниво 0= ИЗКЛ.; Ниво 1= минимална температура; Ниво 2= средна температура; Ниво 3=максимална температура.
- За да загрее подложката най-бързо, включете температурата на Ниво 3. През първите 10 минути подложката ще загрее най-много.
- **ВАЖНО:** Ако използвате уреда за няколко часа препоръчваме да изберете най-ниската степен на затопляне, за да избегнете претопляне и изгаряне на краката си.
- Подложката има функция за автоматично изключване. Тя се изключва след припл. 90 минути на работа. След това дисплеят за настройка на температурата започва да мига. За да включите

подложката отново след това, бутон ВКЛ./ИЗКЛ. (5) трябва да бъде на позиция „0“. След няколко секунди може да включите уреда отново.

- За да изключите уреда плъзнете бутон ВКЛ./ИЗКЛ. (5) до позиция „0“.
- Ако не използвате уреда винаги го изключвайте от бутона за ВКЛ./ИЗКЛ. и го водете от контакта.

V. Почистване и съхранение:

- **ВАЖНО:** Контролерът никога не трябва да се мокри. Почиствайте го със суха кърпа.
- Почиствайте леки замърсявания по уреда с кърпа или гъба, навлажнена с малко течен миеш препарат за деликатни тъкани. Не използвайте разтворители или други силни почистващи препарати.
- **ВАЖНО:** Не мокрете, перете, давайте на химическо или гладете уреда.
- Вълнената подплата се маха и може да я перете на програма за деликатни тъкани на 30°C с мек перилен препарат.
- Не използвайте уреда и подплатата преди да са напълно изсъхнали.
- Преди да приберете уреда го оставете да изстине напълно. Не поставяйте тежки предмети върху уреда.

VI. Регулаторна информация:



Поради екологични съображения не изхвърляйте устройството в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете устройството в пункт за събиране или рециклиране.

Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Уредът е в съответствие с изискванията на Директива 93/42/ЕИО.



Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.

VII. Гаранционни условия:

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта. Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Weiger не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.