

Ръководство на потребителя за нагревател и масажор за крака Beurer FWM 45



1. ВКЛЮЧЕНО В ДОСТАВКАТА

- 1 бр. подгревател за крака с вълнена подплата Beurer FWM 45
- 1 бр. кабел за захранване

2. ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Преди употреба прочетете тези инструкции внимателно – в противен случай може да пострадате в следствие на неправилна употреба на този уред (токов удар, изгаряния). Ако дадете този уред на някой друг, моля предайте им и тези инструкции за употреба.
- Този уред не бива да се използва от хора с намалена чувствителност към топлина – диабетици, хора с кожни промени, свързани със заболяване, хора с белези на кожата в зоната на третиране и хора, които са приели алкохол или болкоуспокоителни.
- Този уред не бива да се използва от деца между 0 – 3 години, поради по-ниската им чувствителност към топлина.
- Уредът може да се използва от деца над 8-годишна възраст и хора с намалени физически, сензорни или умствени способности само под надзор и след инструктаж за опасностите от употреба.
- Уредът не е играчка – дръжте го далеч от деца.
- Уредът не бива да се използва или да се почиства от деца, ако не са в присъствието на възрастен.
- Този уред не е предназначен за употреба в болници.
- Не използвайте този уред върху животни или докато сте с обувки!
- Не слагайте игли и други остри предмети в уреда и не го използвайте във влажни помещения.
- Ако уредът е мокър в никакъв случай не го използвайте!
- Използвайте само предоставеното оригинално захранване Тип:

EU: KL-AD3060VA


GB: RSS1006-240120-W3U-B-C

AU: RSS1006-240120-W2A-B

- Електрическите и магнитни полета, излъчвани от този уред могат да повлияят функцията на пейсмейкърите. Независимо от това те са в допустимите граници: сила на електрическо поле: макс. 5000 V/m, сила на магнитното поле: макс. 80 A/m, плътност на магнитния поток: макс. 0,1 милитесла.
- Моля консултирайте се с лекар и с производителя на вашия пейсмейкър преди да използвате този уред.
- Пазете кабела от горещи повърхности, остри предмети, нараняване, прегъване и усукване.
- Проверявайте уреда редовно за следи от повреда. Ако откриете такива не го включвайте преди оторизиран техник не го прегледа и поправи.
- Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се смени от оторизиран техник. Ако не може да се смени, целият уред трябва да бъде изхвърлен.
- Уредът е предназначен за употреба само върху хора в зоната на краката. Той не е заместител на лекарска помощ.
- Уредът е само за лична употреба и не е предназначен за медицински или търговски цели.
- В никакъв случай не отваряйте или ремонтирате уреда сами, тъй като перфектната му работа вече не може да бъде гарантирана. Всеки опит за самостоятелна поправка прави гаранцията невалидна.

3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

1. Кабел
2. Щепсел
3. Управление на уреда (контролер)
4. Бутон за настройка на масажа (0-1-2)
5. Бутон за настройка на затопляне (0-1-2)
6. Вълнена подплата
7. Подгревател за крака

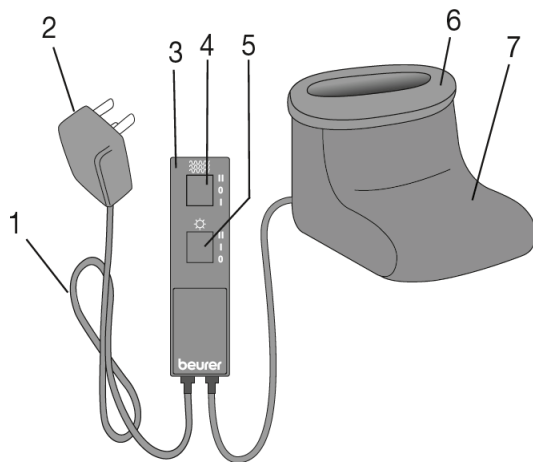

4. ПОДГОТОВКА ЗА УПОТРЕБА

- Махнете опаковката на уреда и проверете дали няма следи за повреда върху него или кабела.
- Свържете кабела към уреда и сложете щепсела в електрически контакт.

5. УПОТРЕБА

- Най-бързият начин да затоплите уреда е да го включите на най-високата степен на затопляне – 2. Степента на работа може да бъде намалена по-късно, ако е необходимо.
- Уредът може да се използва и когато не е включен: вълнената му подплата ще затопли краката ви, дори когато няма ел. контакт наблизо.
- За да изключите уреда плъзнете бутона за масаж и бутона за затопляне към позиция „0“.
- Ако не използвате уреда за затопляне и за масаж, винаги го изключвайте от бутон (4) и (5) и го вадете от контакта. Също така вадете захранващия кабел от самия уред.

5.1 Настройки на затопляне и масаж

Само масаж:

- Ниво 1 (ниско): релаксиращ масаж.
- Ниво 2 (силно): ободряващ масаж.
- Бутонът за затопляне е на позиция „0“.

Само затопляне:

- Ниво 1: минимална топлина.
- Ниво 2: максимална топлина.
- Бутонът за масаж е на позиция „0“.

Масаж и затопляне

- Може да изберете нивото на масаж и затопляне според вашите предпочитания.

ВАЖНО: Ако използвате уреда за няколко часа препоръчваме да изберете най-ниската степен на затопляне, за да избегнете претопляне и изгаряне.

6. ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

- Изключете уреда преди почистване, вадете захранващия кабел от уреда и от контакта.
- **ВАЖНО:** Контролерът никога не трябва да се мокри. Почиствайте го със суха кърпа.
- Почиствайте леки замърсявания по уреда с кърпа или гъба, навлажнена с малко течен миеш препарат за деликатни тъкани. Не използвайте разтворители или други силни почистващи препарати.
- **ВАЖНО:** Не мокрете, перете, давайте на химическо или гладете уреда.
- Вълнената подплата се маха и може да я перете на ръка с мек перилен препарат.
- Не използвайте уреда и подплатата преди да са напълно изсъхнали.
- Преди да приберете уреда го оставете да изстине напълно. Не поставяйте тежки предмети върху уреда.

7. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ



Поради екологични съображения не изхвърляйте устройството в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете устройството в пункт за събиране или рециклиране.

Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Уредът е в съответствие с изискванията на Директива 93/42/ЕИО.



Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.

8. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта.

Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Веуегер не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.