

Ръководство на потребителя за термоподложка Beurer HK 26



I. ВКЛЮЧЕНО В ДОСТАВКАТА

- 1 бр. нагревателен елемент
- 1 бр. текстилен калъф
- 1 бр. контролер
- 1 бр. Ръководство за употреба

Проверете целостта на опаковката при доставка на уреда и се уверете, че всички компоненти на устройството са налице. Преди употреба се уверете и че няма видими следи от повреда върху уреда или неговите компоненти. Ако имате съмнения, че устройството е с нарушена цялост, моля, свържете се с търговеца, от когото сте го закупили. Премахнете всички опаковъчни материали от устройството преди да го използвате.

Моля, прочетете внимателно тези инструкции за употреба и ги запазете за по-късна употреба, не забравяйте да ги направите достъпни за други потребители и спазвайте информацията, която съдържат.

II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА

Beurer HK 26 е електрическа термоподложка, която осигурява успокояващо затопляне с три лесно регулируеми температурни степени. Мекият памучен калъф може да се сваля и пере в пералня при 40°C за удобна и лесна поддръжка. Управлението се осъществява чрез контролер с LED бутони, които позволяват лесна настройка дори при слаба осветеност. Вградената система за безопасност на Beurer следи температурата и при необходимост изключва уреда, а автоматичното изключване след 90 минути осигурява допълнителна защита и спокойствие при употреба. Термоподложката е проектирана да осигурява комфорт и облекчение на напрежението в различни части на тялото, като гърба или краката. Предназначена е за употреба само от хора. За да избегнете повреда на покривния филм и/или изолацията на кабелите, не използвайте уреда в комбинация с етерични масла или лосиони.


III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Неспазването на посочените по-долу указания може да доведе до нараняване или материални щети (токов удар, изгаряния на кожата, пожар). Информацията за безопасност по-долу има за цел да защити както вашето здраве, така и това на околните, както и да предпази устройството от повреди. Моля, спазвайте тези указания и ги предавайте заедно с уреда, ако го предоставяте на други лица.
- Устройството не трябва да се използва от хора, които не усещат топлина или от други уязвими лица, които може да не са в състояние да реагират на прегряване – например диабетици, лица с кожни увреждания в зоната на приложение (вследствие на заболяване или белези), както и след прием на болкоуспокояващи или алкохол.
- Това устройство не трябва да се използва от малки деца (0–3 години), тъй като те не могат да реагират на прегряване.
- Устройството може да се използва от деца над 3 и под 8 години само под наблюдение. В този случай контролерът винаги трябва да е настроен на най-ниската температурна степен.
- Уредът може да се използва от деца над 8-годишна възраст, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или с липса на опит и познания, само под наблюдение или след като са били инструктирани как да използват устройството безопасно, както и относно рисковете, свързани с употребата му.
- Уредът не е играчка – не позволявайте на децата да играят с него.
- Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен ако не са под наблюдение.
- Това устройство не е предназначено за използване в болници.
- Устройството е предназначено само за домашна или лична употреба и не бива да се използва за търговски цели.
- Не пробждайте устройството с карфици, игли или други остри предмети.
- Не използвайте уреда, когато е прегънат или намачкан.
- Не използвайте устройството, ако е мокро.
- Това устройство трябва да се използва само с контролер, посочен на етикета.
- Това устройство трябва да се включва само към мрежово напрежение, посочено на етикета.

- При продължителна употреба на устройството препоръчваме да зададете най-ниската температурна степен на контролера, за да избегнете прегряване на нагриваната част от тялото, което може да причини изгаряния на кожата.
- Електрическите и магнитните полета, излъчвани от това устройство, могат да попречат на работата на вашия пейсмейкър. Въпреки това те са значително под допустимите граници: интензитет на електрическото поле: макс. 5000 V/m, интензитет на магнитното поле: макс. 80 A/m, магнитна индукция: макс. 0,1 милитесла. Затова се консултирайте с вашия лекар и с производителя на пейсмейкъра, преди да използвате това устройство.
- Не дърпайте, не усуквайте и не прегъвайте рязко кабелите.
- Ако кабелът и контролерът на устройството не са правилно разположени, съществува риск от заплитане, задушаване, спъване или настъпване. Потребителят трябва да се увери, че излишната дължина на кабела, както и самите кабели, са подредени по безопасен начин.
- Редовно проверявайте устройството за признаци на износване или повреда. При наличие на такива признаци, при неправилна употреба или ако устройството не се загрева, то трябва да бъде прегледано от производителя, преди да се използва отново.
- Ако захранващият кабел на устройството е повреден, той трябва да бъде изхвърлен. Ако не може да бъде премахнат, цялото устройство трябва да се изхвърли.
- Не излагайте контролера и кабелите на пряка слънчева светлина.
- Когато устройството е включено:
 - не поставяйте остри предмети върху него,
 - не поставяйте източници на топлина, като грейки с гореща вода или подобни.
- Електронните компоненти в контролера се нагряват по време на работа. Поради това той не трябва да се покрива или поставя върху нагревателния елемент, когато устройството е включено.
- Оставайте устройството да се охлади, преди да го приберете. Неспазването на това може да повреди устройството.
- За да избегнете силно намачкване на устройството, не поставяйте предмети върху него, докато се съхранява. В противен случай устройството може да се повреди.
- Ако имате въпроси относно употребата на нашите устройства, моля, свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти.

IV. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

1. Щепсел за захранване
2. Контролер
3. Бутон за вкл./изкл.
4. Бутон за настройване на температурата
5. Осветен дисплей за температурни настройки
6. Конектор
7. Нагревателен елемент
8. Текстилен калъф

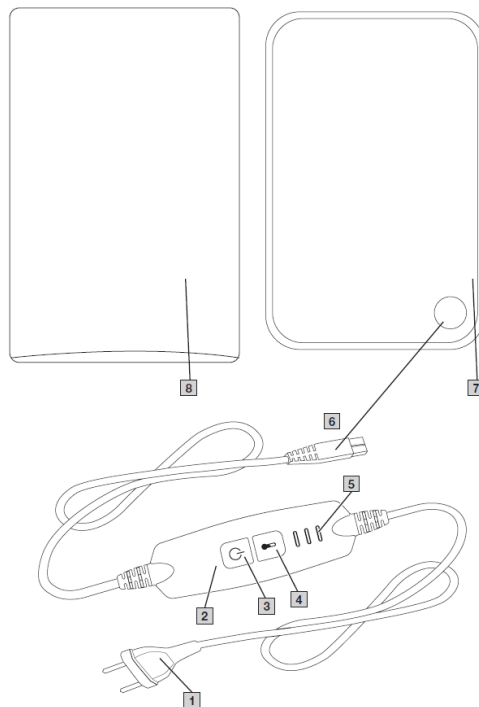

V. УПОТРЕБА


Безопасност

- Устройството е оборудвано със система за безопасност. Тази сензорна технология осигурява защита от прегряване по цялата повърхност на нагревателния елемент, като автоматично изключва устройството при повреда. Ако системата за безопасност е изключила устройството, контролерът вече няма да светне по никакъв начин, дори при включване.
- Моля, имайте предвид, че по съображения за безопасност устройството не може да се използва повторно след настъпване на повреда и трябва или да бъде изхвърлено или изпратено на посочения сервизен адрес.
- В никакъв случай не свързвайте повредения нагревателен елемент с друг контролер от същия тип. Това също ще активира постоянно изключване от системата за безопасност в контролера.

Първоначална употреба

Уверете се, че нагревателният елемент не се нагъва или прегъва по време на употреба.

1. Най-напред свържете контролера [2] към нагревателния елемент, като поставите конектора [6].
2. След това включете щепсела [1] в електрическия контакт.

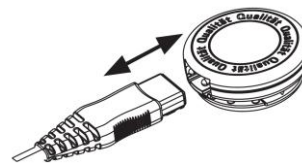

Включване

Натиснете бутона за вкл./изкл. [3]. При включване дисплеят с температурните настройки [5] светва. Последователност на превключване: 3-1-2-3-1...

Настройка на температурата

За да промените температурата, натиснете бутона за настройване на температурата [4].

Степен 1: минимална топлина;

Степен 2: средна топлина;

Степен 3: максимална топлина.

Бележка: Най-бързият начин за затопляне на устройството е първоначално да се избере най-високата температурна степен.

Автоматично изключване

Това устройство е оборудвано с функция за автоматично изключване. Тя прекъсва подаването на топлина и изгасва дисплея за температурни настройки приблизително 90 минути след началото на употреба. За да рестартирате устройството, натиснете бутона за вкл./изкл. [3]. След около 5 секунди е възможно отново да го включите.

Внимание: Ако устройството се използва в продължение на няколко часа, препоръчваме да изберете най-ниската температурна степен на контролера, за да се избегне прегряване на загреваната част от тялото, което може да доведе до изгаряния на кожата.

Изключване

За да изключите устройството, натиснете бутона за вкл./изкл. [3]. Дисплеят с температурните настройки ще изгасне.

Бележка: Ако устройството не се използва, натиснете бутона за вкл./изкл. [3], за да го изключите, и извадете щепсела от контакта. След това откачете контролера [2] от нагревателния елемент, като издърпате конектора [6].

VI. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Почистване

Преди почистване винаги първо изваждайте щепсела от контакта. След това откачайте контролера от нагревателния елемент, като издърпвате конектора. В противен случай съществува риск от токов удар. Контролерът никога не бива да влиза в контакт с вода или други течности, тъй като това може да го повреди.

- За почистването на контролера използвайте суха кърпа без власинки. Не използвайте химически или абразивни почистващи препарати.
- За почистване на пластмасовия защитен капак на нагревателния елемент използвайте леко влажна кърпа.

Моля, имайте предвид, че нагревателният елемент не може да се пере в пералня, да се центрофугира, суши в сушилня, почиства химически, изстиска, притиска или глади.

- Текстилният калъф може да се пере съгласно символите на етикета и трябва да се сваля от нагревателния елемент преди почистване.
- Не свързвайте контролера обратно към нагревателния елемент, докато конектора и нагревателният елемент не са напълно сухи. В противен случай устройството може да се повреди.

Важно: Никога не включвайте устройството, за да го изсушите! Това може да доведе до токов удар.

Съхранение

Ако не възнамерявате да използвате устройството за по-дълъг период от време, препоръчваме да го съхранявате в оригиналната му опаковка. За тази цел откачете контролера от нагревателния елемент, като издърпате конектора.

Ремонти

Само специализиран персонал може да извършва ремонт на електрически уреди. При никакви обстоятелства не отваряйте и не се опитвайте да ремонтирате устройството (включително аксесоарите) сами. Това може да доведе до неправилна работа на уреда и да създаде сериозен риск за безопасността. За ремонт, моля, свържете се с отдел „Обслужване на клиенти“ или с оторизиран търговец. Неспазването на тези указания води до анулиране на гаранцията.

VII. СЪПКИ ПРИ ПРОБЛЕМИ

Проблем	Температурните настройки не светят, въпреки че: – контролерът е правилно свързан с нагревателния елемент, – щепселът е включен в работещ контакт, – е натиснат бутонът за вкл./изкл. 3.
Възможна причина	Системата за безопасност е изключила устройството за постоянно.
Решение	Изпратете нагревателния елемент и контролера за сервизно обслужване.

VIII. РЕГУЛАТОРНА ПОЛИТИКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Поради екологични съображения не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране. Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). При въпроси относно правилното изхвърляне на устройството, моля, обърнете се към съответните местни власти.



IX. ГАРАНЦИЯ/СЕРВИЗ

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта.

Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Beurer не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Производител: Beurer GmbH

Адрес: Soeflinger Strasse 218

89077 Ulm, Germany

Телефон: +497 313 9890

Имейл: customerservice@beureruk.com

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.