

Ръководство на потребителя за фотоепилятор Beurer IPL 10000



1. ВКЛЮЧЕНО В ДОСТАВКАТА

- 1 бр. Beurer SalonPro System базово устройство с апликатор
- 1 бр. прецизна приставка
- 1 бр. захранващ кабел
- Тези инструкции за употреба

2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УРЕДА

IPL 10000 е уред за трайно премахване на нежелано окосмяване по тялото при жени и мъже на основата на светлина – добре известен и доказан метод. Фотоепилацията се е доказала като безопасен и ефективен метод за постигане на трайно намаляване на окосмяването за 15 години клинично приложение по целия свят.

Уредът трябва да се използва само върху **крака, подмишници, бикини линия, гърди, корем и лице (само в зоната от скулите надолу)**. Уредът не е подходящ за премахване на окосмяване в зоната около ануса, гениталиите или зърната на гърдите.

Принцип на фотоепилацията

- Фотоепилацията е базирана на принципа на селективната фототермолиза, който използва оптична енергия за дезактивиране на растежа на космите. За да се постигне такъв термичен ефект, коренът на косъма трябва да поглъща избирателно светлинната енергия и да я преобразува в топлина. Тази селективност се постига, когато оптичната енергия, отделяна в тъканта, се абсорбира главно от пигмента меланин в космите. Високоенергийната светлина се преобразува в топлинна енергия (топлина), която деактивира растежа на космите.
- Всеки косъм по нашето тяло преминава през три фази на цикъл на растеж: анаген, катаген и телоген. Само космите, които са в анагенна фаза (фаза на растеж), реагират на третиране с IPL.



Анаген
(фаза на растеж)



Катаген
(преходна фаза)



Телоген
(фаза на почивка)

- Въпреки че продължителността на цялостния цикъл на растеж на косъма е различен при всеки човек и зависи от областта на тялото, върху която расте косъма, той обикновено продължава от 18 до 24 месеца.
- Необходим е поне един пълен цикъл на растеж на косъма, за да се постигне трайно обезкосмяване с помощта на Beurer SalonPro System

Функции за защита

- Уредът има вградена IPL (Intense Pulsed Light), с която могат да бъдат постигнати трайни резултати за премахване на космите само с малка част от енергията, използвана от други устройства за премахване на косми на базата на светлина. Ниското ниво на мощност намалява риска от нараняване или усложнения и допринася за общата ви безопасност.

- Уредът има **сензор за цвят на кожата**, който ви предпазва от третиране, ако кожата ви е твърде тъмна или прекалено загоряла.
- Уредът има вграден **UV филтър**, който блокира вредните UV лъчи.
- Уредът има вграден **сензор за контакт с кожата** за защита на очите. Той е разработен, за да не могат да се излъчват светлинни импулси, когато уредът се държи във въздуха. Светлинен импулс се излъчва само когато сензорът за контакт с кожата е в пълен контакт с кожата.

3. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Уредът е предназначен за домашна употреба, а не за търговски цели.
- Уредът е подходящ за лица над 18 години.
- Дръжте уреда и опаковката далеч от деца.
- Ако кабелът е повреден, той трябва да се смени. Ако не може да бъде сменен, уредът трябва да се изхвърли.
- Уредът и адаптерът не трябва да се мокрят. Ако уредът попадне във вода, не го пипайте, а веднага изключете адаптера от контакта.
- Не използвайте уреда във влажни помещения и в близост до вода.
- Пазете далече от очите. Не гледайте в източника на светлина. Уверете се, че светлинната зона на уреда винаги е в постоянен контакт с кожата.
- Преди всяка употреба проверявайте уреда и кабела за следи от повреда. Ако установите такива не използвайте уреда и потърсете помощ от оторизиран техник.
- Винаги поставяйте уреда върху стабилна равна повърхност.
- Не пъхайте предмети в уреда.
- Не блокирайте вентилационните отвори на уреда.
- Ако захранващият кабел е повреден трябва да бъде сменен от оторизиран техник. Ако това е невъзможно трябва да изхвърлите уреда.
- Никога не оставяйте уреда включен, ако не сте при него, особено в случаите, когато има деца наблизо.
- Уредът трябва да се използва само по предназначение и според инструкциите за употреба на производителя. Производителят не носи отговорност за повреди или наранявания, причинени от неправилна употреба. Ако дадете този удар на друг човек, задължително им предайте и тези инструкции за употреба.
- Уредът може да се използва от хора с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит или знания само под надзор или след като са били инструктирани за безопасното използване на уреда и са напълно наясно с произтичащите от това рискове при употреба.
- Не използвайте уреда по време на бременност и кърмене.
- Ако се появи силно зачервяване, образуване на мехури или изгаряния по кожата, спрете използването на уреда незабавно.
- Направете тест за чувствителност на всяка зона от тялото, която искате да третирате, 48 часа преди пълното третиране.
- Не излъчвайте светлинни импулси във въздуха.
- Не използвайте уреда върху кожа с тен или след слънчева баня.
- Не използвайте този уред върху много тъмна кожа – процедурите върху много тъмна кожа могат да имат негативни последици – изгаряния, мехури, хипопигментация или хиперпигментация.
- **Забележка:** Уредът работи най-добре на тъмен тип косъм (с високо съдържание на меланин). Черното и тъмнокафяво окосмяване показват най-добра реакция и, въпреки че кафявото и светло-кафявото окосмяване също ще реагират на третирането, те обикновено изискват повече сесии за епилация. Червеното окосмяване може да предизвика реакция. Бялото, сивото и русото окосмяване обикновено не реагират на уреда, въпреки че някои потребители забелязват резултати след многократни сесии на епилация.
- Уредът може да предизвика временна пигментация на кожата.
- Не поправяйте уреда сами. Поправки могат да се извършват само от оторизиран технически персонал. В случай на самостоятелни опити за поправка рискувате да се нараните сериозно или да увредите зрението си. Ако се опитате да поправите уреда сами, гаранцията му става невалидна.
- Не използвайте уреда с контактен гел. Това може да го повреди.
- Дръжте уреда далеч от вода и не го мокрете – риск от токов удар!

- Ако уредът падне във водата моментално го изключете от захранването! Никога не бъркайте във водата, за да го извадите, ако не сте го изключили от контакта!
- Никога не пипайте уреда и щепсела с мокри ръце!
- Използвайте уреда само на закрито.
- Въз основа на таблицата, която може да намерите в брошурата на уреда на www.polycomp.bg може да определите кои нива на интензивност на светлината са най-подходящи за цвета на вашата кожа и косми, и дали този метод изобщо е подходящ за вас (ако не е, това е отбелязано с "х" в диаграмата).
- След употреба, преди почистване или съхранение вадете уреда от контакта.
- Използвайте само одобрени от производителя приставки и аксесоари.
- Не използвайте уреда, ако видите или усетите дим при употреба.
- Не използвайте уреда, ако отворът на вентилатора е напукан, отделя се или липсва изцяло.
- Не използвайте уреда, ако сензорът за цвят на кожата или светлинната зона са напукани или счупени.
- Не използвайте уреда, ако корпусът му е напукан или счупен.
- **Не използвайте този уред, ако:**
 - Ако сте болни или сте били болни от рак на кожата;
 - Ако имате келоидни белези или страдате от епилепсия;
 - Ако имате херпес или псориазис;
 - Ако страдате от някаква форма на светлочувствителност, като порфирия, полиморфна фотодерматоза, слънчева уртикария, лупус и др.
 - Ако страдате от метаболитно разстройство, като диабет.
 - Ако страдате от нарушение в кръвосъсирването.
- **Не използвайте този уред, ако взимате някое от следните лекарства:**
 - медикаменти, които правят кожата по-чувствителна към светлина, включително нестероидни противовъзпалителни средства (напр. аспирин, ибупрофен, парацетамол), тетрациклини, фенотиазини, тиазидни диуретици, сулфониурей, сулфонамид, DTIC, флуорурацил, винбластин, гризеофулин, алфа-хидроксис киселини, бета-хидроксис киселини, Retin-A®, Accutane® и/или локални ретиноиди);
 - Ако се лекувате или наскоро сте били подложени на лечение с азелаинова киселина;
 - Ако сте приемали тетрациклинови антибиотици в последните 2 седмици;
 - Ако сте се лекували с Accutane® в последните 6 месеца;
 - Ако сте били на стероиди през последните три месеца;
 - Ако през последните шест до осем седмици сте имали процедура по ексфолиация на кожата или друга процедура за изглаждане на кожата;
 - Ако сте били подложени на лъчева или химиотерапия през последните три месеца;
- **Не използвайте уреда върху следните зони:**
 - Върху лигавиците в областта на носа или ушите.
 - Върху или в близост до активен имплант, като пейсмейкър или устройство за инконтиненция, инсулинова помпа и др.
 - Върху лицето над скулите, около очите, веждите или миглите, тъй като това може да доведе до сериозно увреждане на очите.
 - Върху зърната и ареолите на гърдите, гениталиите (мъже и жени) или около ануса.
 - Върху пиърсинги или други метални предмети, като обеци или бижута.
 - Върху татуировки или перманентен грим.
 - Върху тъмнокафяви или черни петна, като големи лунички, родилни петна, бенки или брадавици.
 - При екзема, псориазис, лезии, открити рани или остри инфекции. Изчакайте докато засегнатата зона заздравее преди да използвате уреда.
 - Върху увредена или напукана кожа или в области, застрашени от злокачествено заболяване.
 - Върху области на тялото си, където може да искате да имате окосмяване в бъдеще.

Внимание: Този списък не е изчерпателен. Ако приемате лекарства, отпускани по лекарско предписание, редовно се следите поради заболяване и/или не сте сигурни дали уредът е безопасен за употреба, консултирайте се с вашия лекар или дерматолог преди да използвате уреда.

- **Слънчеви бани преди третиране**

- Преди да използвате уреда, изчакайте поне две седмици след като сте се излагали на слънчева баня.
- Преди да използвате уреда, проверете кожата си за следи от слънчево изгаряне. Изчакайте пълното му излекуване.
- Направете тест за чувствителност върху кожа с тен, за да определите правилното ниво на мощност.
- **Слънчеви бани след третиране**
 - След третиране, изчакайте поне 48 часа преди слънчева баня. Зачервената кожа трябва да се пази от слънце.
 - През първите две седмици след третиране кожата трябва да е покрита с дрехи или да се използва минимум 30-ти защитен фактор против слънце.
- **Солариум**
 - Горните инструкции важат също и при потъмняване чрез използване на солариум и лосион за тен.
- Не използвайте уреда 24 часа преди или след посещения на сауна или басейн, защото хлорът може да предизвика раздразнение на кожата.

Възможни нежелани реакции:


Ако уредът се използва според инструкциите за употреба, рядко могат да се получат странични ефекти или усложнения. Задължително е обаче да сте добре запознати с рисковете при употреба на уреди за фотоепилация в домашна обстановка.

- След третиране е възможно кожата да е леко зачервена, сърбяща или топла на пипане. Тези реакции са безвредни и бързо ще отшумят.
- За кратко може да усетите кожна реакция подобна на слънчево изгаряне в третираната зона. Ако тази реакция не изчезне в рамките на три дни, консултирайте се с лекар.
- След процедура е възможно кожата ви да стане по-суха или раздразнена.
- В редки случаи третираната кожа може да стане много зачервена и подута. Обикновено това се получава при избрано твърде високо ниво на интензивност и е по-вероятно да се появи в чувствителни части на тялото. Зачервяването и подуването трябва да отшумят в рамките на два до седем дни и трябва да се лекуват с често приложение на лед. Трябва да избягвате излагане на слънце.
- Обезцветяването на кожата е много рядко и се проявява като по-тъмни или по-светли петна по засегнатите зони на кожата. То може да бъде причинено от използването на ниво на мощност, което е твърде високо за вашия тон на кожата. Ако обезцветяването не отшуми в рамките на две седмици, консултирайте се с лекар. Не третирайте отново обезцветените зони докато обезцветяването не изчезне напълно.
- В много редки случаи след третиране могат да възникнат изгаряния или лезии по кожата. Изгарянето или лезията може да отнеме няколко седмици, за да се излекува и в изключително редки случаи може да останете белег.
- В много редки случаи могат да се появят кожни инфекции и възпаления. Те може да са следствие от изгаряне или кожна лезия.
- В много редки случаи може да се появи траен белег. Белезите обикновено се появяват под формата на плоска, бяла лезия върху кожата. Може да се наложи последващо естетично лечение за подобряване на външния вид на белега.
- В много редки случаи използването на уреда може да доведе до синьо-лилав хематом, който може да седи пет до десет дни. След като хематомът избледнее, може да се появи ръждивокафяво обезцветяване на кожата (хиперпигментация), което да остане постоянно.

Усложнение	Вероятност	Страничен ефект върху кожата	Вероятност
Прилагане на няколко импулса върху един и същ участък на кожата	Слаба	Леко раздразнение	Слаба
		Зачервяване	Слаба
		Повишена чувствителност	Слаба
		Лезии и изгаряния	Рядка
		Белези	Рядка
		Промяна в пигментацията	Рядка
		Силно зачервяване и подуване	Рядка

		Инфекция	Незначителна
		Хематом	Незначителна

4. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

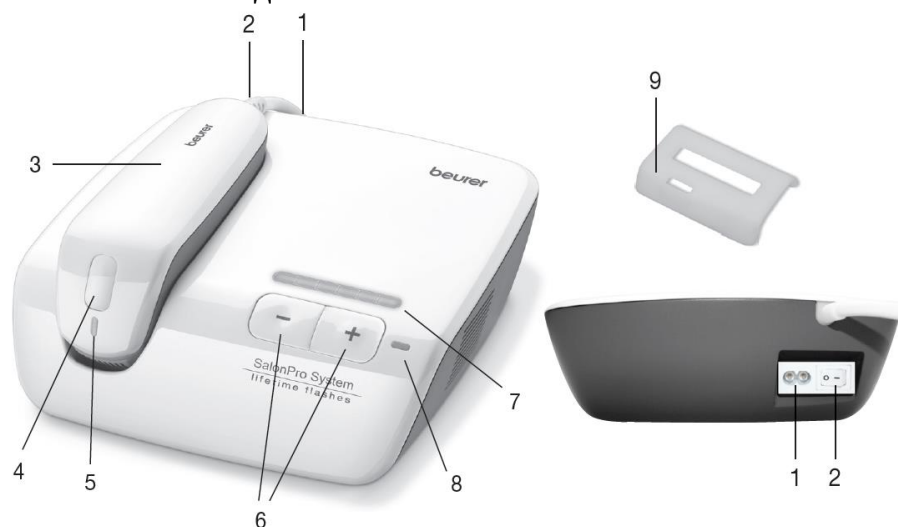

1. Гнездо за захранващ кабел
2. Бутон за включване
3. Апликатор: върху него се намира спусъка, чрез който активирате устройството. Във вътрешната част на апликатора се намира пълнителя.
4. Спусък за включване
5. Светлинен индикатор: той има следните функции:
 - Не свети: импулсът все още не е готов;
 - Свети в зелено: светлинният импулс е готов;
 - Свети в червено: пулсът е блокиран, защото цветът на кожата е неподходящ.
 - Свети в оранжево: импулсът е блокиран, защото няма достатъчен контакт с кожата.
 - Примигва в червено/ светлинният индикатор за енергия свети в зелено: пълнителят не е поставен правилно.
6. Бутони за избор на ниво на интензивност
7. Светлинен индикатор за енергия
8. Светлинен индикатор за „празен пълнител“
9. Прецизна приставка

5. ОПИСАНИЕ НА ПЪЛНИТЕЛ



- Пълнителят има вграден сензор за цвят на кожата. Той отчита цвета на кожата преди всеки импулс – ако отчете, че кожата е прекалено тъмна, импулсите се блокират и уредът спира да работи. Ако няма светлинни импулси и светлинният индикатор свети в червено, уредът е отчел, че процедурата не е безопасна спрямо цвета на кожата ви. Този сензор не само ви помага да установите дали процедурите са безопасни, но и ви помага да установите нивото на интензивност, подходящо за вашата кожа (когато кожата ви не е прекалено тъмна).
- Освен това пълнителят има сензор за контакт с кожата, който не позволява пускането на светлинни импулси при липса на контакт с кожата. Ако няма светлинни импулси и светлинният индикатор свети в оранжево, уредът е отчел, че няма достатъчен контакт с кожата ви.

- В допълнение пълнителят има вградена UV защита, която блокира вредната UV радиация.

6. ПОДГОТОВКА ЗА УПОТРЕБА

Преди употреба трябва да направите следното:

6.1 Проверете кое ниво на интензивност е подходящо за вашия цвят кожа и коса. Направете това чрез таблицата, която може да намерите в брошурата на уреда на www.polycomp.bg

6.2 Избор на ниво на интензивност/ Автоматично отчитане на цвят на кожата

- Автоматичното отчитане на тона на кожата ви позволява да видите подходящото за вас ниво на работа, изписано на устройството.
- За да задействате автоматичното отчитане на цвета на кожата ви, натиснете бутон + и – заедно за 2 секунди.
- Когато всички нива на LED индикатор за енергия светнат едно след друго от ляво на дясно, уредът е готов да отчете цвета на кожата ви.
- Натиснете спусъка на уреда, за да отчетете тона на кожата си. По време на този процес уредът не излъчва светлинни импулси.
- Винаги правете този тест върху дадената част на тялото, която искате да третирате. При първа употреба изберете по-тъмна част на тялото, като външната част на ръката ви.
- Ако тестът е успешен на светлинния индикатор за енергия ще се появи подходящото ниво на интензивност за вас. Ако тестът е бил неуспешен всички нива на LED индикатор за енергия отново ще светнат едно след друго от ляво на дясно.
- За да излезете от този режим на употреба, натиснете бутон + или бутон -.
- Ако резултатите от теста са различни от тези в таблицата, винаги използвайте по-ниското ниво на интензивност.

6.3 Направете си тест за чувствителност:

- Направете тест за чувствителност на всяка зона от тялото, която искате да третирате, 48 часа преди пълното третиране.
- При третиране на лицето, тестът трябва да се извърши върху зона без косми – напр. под ухото или отстрани на врата.
- Не почиствайте кожата със запалими течности като алкохол или ацетон скоро преди използване на уреда.
- Обръснете зоните, които искате да третирате. Не използвайте крем за депилация вместо ножче за бръснене.
- Уверете се, че зоните за третиране са избръснати, чисти и сухи – без приложени пудра, крем, грим или дезодорант.
- Натиснете бутона за включване (2) върху базовото устройство. Уредът автоматично се наглася на най-ниска мощност (вижте **т. 7 Работа с уреда** за подробни указания как да работите с уреда).
- Поставете светлинната зона върху кожата и натиснете спусъка, за да освободите светлинен импулс. Уверете се, че светлинната зона и сензорът за контакт влизат в пълен контакт с кожата. Светлинен импулс може да се освободи само при пълен контакт с кожата. Автоматично импулсът е на най-ниско ниво на интензивност. Ще видите ярка светкавица, ще чуете пукащ шум и може да почувствате леко усещане за парене и/или топлина. В рамките на макс. 3 секунди уредът е готов за следващия импулс и индикаторът му свети в зелено. За да пуснете следващия импулс натиснете спусъка.
- Увеличете нивото на интензивност само в случаите, че предишното ниво не ви е било комфортно.
- Увеличете нивото на интензивност с + бутона.
- Завършете теста за чувствителност на кожата. Изчакайте **48 часа** и проверете третираните участъци. Ако повърхността на кожата е нормална (без реакция или само с леко зачервяване), можете да третирате тестваните зони с установеното при теста максимално комфортно за вас ниво на интензивност.
- Ако по кожата има значително зачервяване или подуване, изчакайте да отшуми напълно и направете нов тест при по-ниска мощност. При повторна реакция, консултирайте се с лекар.
- **Внимание:** Не третирайте зона в която сте си направили тест за чувствителност минимум 7 дни след теста.

6.4 Планиране на процедурите

- Първите 3 или 4 процедури трябва да се правят през няколко седмици. Имайте предвид, че растежът на космите е строго индивидуален, но обикновено цикълът на растеж на космите е между 18 и 24 месеца.

- Петата, шестата и седмата процедури трябва да се направят през приблизително 4 седмици една от друга.
- След това използвайте уреда от време на време, докато не постигнете продължителни резултати.
- Имайте предвид, че няма да подобрите резултатите от процедурите, ако ги правите по-често от през 2 седмици.
- Поради хормонални или други физиологични промени е възможно да трябва да използвате този уред от време на време дори след като сте постигнали желаните от вас резултати с цел поддържането им.

7. РАБОТА С УРЕДА


1. Извадете уреда от опаковката му и се уверете, че по него няма видими следи от повреда.
2. Проверете дали пълнителят е поставен правилно в уреда.
3. Поставете кабела в уреда, а след това поставете щепсела на кабела в контакта на електрическата мрежа.
4. Не почиствайте кожата със запалими течности като алкохол или ацетон скоро преди използване на уреда.
5. Обръснете зоните, които искате да третирате. Не използвайте крем за депилация вместо ножче за бръснене.
6. Уверете се, че зоните за третиране са избръснати, чисти и сухи – без приложени пудра, крем, грим или дезодорант.
7. Натиснете бутона за включване (2) върху базовото устройство. И двата светлинни индикатора ще светнат, а вентилаторът започва да работи (ще чуете звук, подобен на сешоар).
8. Изберете подходящото за вас ниво на мощност с бутони +/- (преди това сте се консултирали с таблицата или сте си направили автоматично отчитане на цвят на кожата).
9. Поставете уреда върху кожата под ъгъл от 90 градуса, за да има пълен контакт на светлинната зона с кожата. Вграденият сензор за контакт с кожата не допуска уредът да работи при недостатъчен контакт с кожата ви. Натиснете спусъка, за да освободите светлинен импулс.
10. Ще видите ярка светкавица, ще чуете пукащ шум и може да почувствате леко усещане за парене и/или топлина. В рамките на макс. 3 секунди уредът е готов за следващия импулс и индикаторът му свети в зелено. Тъй като този уред има функция „светкавично плъзгане“, когато натиснете и задържите спусъка, уредът започва да пуска светкавица на всеки три секунди без да натискате спусъка ръчно.
11. Никога не третирайте едно и също място два пъти по време на една и съща процедура. Това увеличава риска от нежелани кожни проблеми.
12. Препоръчваме да третирате кожата си на „редове“ – по този начин може да проследите кои части на кожата сте третирали и да ги проследите за нежелание странични ефекти.
13. Изключете уреда от бутона и го извадете от електрическата мрежа.
14. Препоръчително е да почиствате уреда след всяка процедура, особено светлинната му зона.
15. Препоръчва се да съхранявате уреда в оригиналната му опаковка, далеч от вода.

7.1. Третиране на лице

- Не използвайте уреда върху лицето при по-високо ниво на интензивност от 3. Не използвайте уреда върху лицето в областта над скулите или върху очите, веждите и миглите, тъй като това може да доведе до сериозно увреждане на очите. Не използвайте уреда върху лигавиците в областта на носа или гърлото.
- Кожата на лицето е много чувствителна и изисква специални грижи. Спазвайте всички инструкции за безопасност в това ръководство на потребителя, за да предотвратите неблагоприятни последици. Препоръчваме ви първо да извършите третиране на тялото си и да се запознаете с работата на уреда, преди да извършите третиране на лицето. Уредът може да се използва за третиране на всички области на лицето в зоната под скулите, като горна устна, бузи, челюст, брадичка и врат.

Забележка: Прецизната приставка, може да се използва за улесняване на уреда върху лицето. Тя намалява позволява по-прецизно приложение.

- Приставката се поставя лесно върху позициониране и натиск върху
- Позиционирайте приставката така, изрязана зона в нея да се подравни с кожата/цвят на кожата. Ако не е възможно да се задейства
- Използвайте приставката при максимално ниво на мощност 3 и само ако цветът на кожата ви е по-светъл от тип 5.

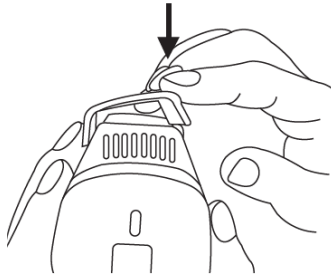

включена в комплекта, приложението на светлинната зона и

главата на уреда чрез светлинната зона. че съответната над сензора за контакт сензорът бъде покрит, светлинен импулс.

- Трябва да извършите тест за чувствителност (вж. **точка 4.3.**) 48 часа преди третирането. Тестът трябва да се извърши върху зона без косми – напр. под ухото или отстрани на врата. **Внимание:** Не трябва да третирате зоната на теста отново преди да е минала поне една седмица от теста за чувствителност.
- Маркирайте третирания участък с бяла очна линия. Използвайте маркировката като ориентировъчна линия за импулсите. Така ще предотвратите припокриване на участъци третирана кожа. Използвайте огледало, за да позиционирате уреда правилно върху зоната за третиране.

Третиране на горната устна

Позиционирайте светлинната зона на уреда както е показано на илюстрацията. Пуснете импулс във всеки от маркираните участъци. Избягвайте третиране на ноздрите и устните, тъй като са чувствителни. Можете да „свиете“ устните си или да ги притиснете една към друга, за да направите слой бяла очна линия върху устните и около ръба на устните. Бялата линия ще отрази светкавицата и ще предпази устните ви от случайно прилагане на импулс върху тях.



на илюстрацията. чувствителни. друга, за да направите слой бяла очна линия

Третиране на бузите и челюстта

Позиционирайте светлинната зона на уреда както е показано на илюстрацията. Пуснете импулс във всеки участък като се придвижвате от едната страна на бузата или челюстта до другата.



Третиране на врата и брадичката

Позиционирайте светлинната зона на уреда както е показано на илюстрацията. Пуснете импулс във всеки участък като се придвижвате от едната страна на врата или брадичката до другата.

Грижа след третиране на лицето

- Приложете успокояващ лосион, напр. алое вера.
- Не използвайте ексфолианти, избелващи лосиони или подобни продукти поне 24 часа след третирането, за да не раздразните кожата.
- Поне 48 часа след третирането избягвайте излагане на пряко слънце за повече от 15 минути. Използвайте слънцезащитен крем с фактор 30 или по-висок.
- Не махайте косми от третираните участъци с восък или пинсета.

Запомнете, че задоволителните резултати могат да отнемат един цял цикъл на растеж на косъма (18-24 месеца).

8. ПОЧИСТВАНЕ

Почиствайте уреда след всяко приложение като обърнете особено внимание на светлинната зона.

- Изключете уреда от контакта преди да го почистите.
- Почиствайте уреда с чиста суха кърпа, леко навлажнена със специален препарат за почистване на електронни устройства, като обърнете особено внимание на светлинната зона. Не използвайте химически или абразивни препарати за почистване.

9. ПОДМЯНА НА ПЪЛНИТЕЛЯ

Пълнителят има около 250,000 светлинни импулса, които стигат за приблизително 40 години нормална употреба (от един човек върху зоните на крака, ръце, подмишници, бикини зона и лице). Това значи, че при нормални обстоятелства няма да ви се наложи да подменяте този пълнител. Ако върху пълнителя има големи петна или лещата му е спукана/счупена се свържете с центъра за обслужване на клиенти на Beurer.

10. РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Уредът не се включва

- Уверете се, че захранващият кабел е поставен правилно в уреда и че кабелът е поставен правилно в ел. контакт.

При натискане на спусъка не се излъчва светлинен импулс

- Уверете се, че уредът е в пълен контакт с кожата. В противен случай индикаторът ще свети в оранжево. За да разрешите проблема увеличете контакта между уреда и кожата ви.
- Уверете се, че пълнителят е правилно поставен.
- Уверете се, че уредът не е отчел, че кожата ви е неподходящ цвят за провеждане на успешна и безопасна процедура с него. Изпускането на светлинен импулс се блокира при засичане на прекалено тъмен тен на кожата.
- С случай на проблеми от общ характер с работата на уреда, всички 6 светлинни индикатори започват да мигат в зелено. Изключете уреда с бутон (2), изчакайте 30 секунди го включете отново с бутон (2).

11. ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Технологията наистина ли работи?

Да. Чрез клинични медицински тестове е доказано, че технологията в този уред може да се използва за постигане на дълготрайни резултати от епиляция. Резултатите обаче могат да варират в зависимост от цикъла на растеж на косъма, използваната мощност и дебелината и цвета на космите.

Върху кои зони мога да използвам уреда?

Уредът е предназначен за епиляция на цялото тяло – крака, подмишници, ръце, бикини зона и лицето под скулите.

Колко време продължава една сесия с уреда

Времето варира в зависимост от зоната на приложение. Цялостно третиране на тялото (крака, ръце, подмишници, бикини зона и лице под скулите) отнема приблизително 26 минути. Тъй като уредът работи на ток може да го използвате колкото време искате.

Безопасен ли е уреда?

Уредът е разработен със силен акцент върху вашата безопасност и използва клинично тествана технология. Задължително спазвайте инструкциите за употреба и безопасност.

Има ли болка при използването на уреда?

При правилна употреба повечето потребители на уреда отчитат леко топло усещане при издаване на светлинния импулс. Потребителите с по-гъста и по-тъмна коса могат да изпитат малко по-голям дискомфорт, но отшумява след като сесията за премахване на космите приключи. Уредът има шест настройки на мощността, които можете да изберете в зависимост от чувствителността на вашата кожа.

Кога мога да очаквам видими резултати?

Както при всички други фото- и лазерни епилатори, резултатите не могат да се видят веднага и дори може да мислите, че нищо не се е случило. След сесия за фотоепиляция може да изглежда, че космите израстват отново, но обикновено повечето от тях ще изпаднат след две седмици. Освен това космите растат на три различни етапа и уредът има ефект само върху космите във фазата на активен растеж. Това е една от основните причини, поради които са необходими няколко сесии за постигане на траен резултат.

Могат ли мъже да използват този уред?

Да, но имайте предвид, че космите на мъжете (особено в зоната на гърдите) е много гъста и расте с бързи темпове, което значи че най-вероятно употребата при мъжете ще изисква по-продължително третиране.

Вярно ли е, че някои косми растат по-тънки и меки след третиране?

Това явление е документирано и коментирано от козметици и лекари, които използват фото- и лазерни епилатори. Възможно е някои косми да пораснат отново по-тънки и фини след епилация с уреда. Обикновено тези косми са само малка част от първоначалните и последващо третиране може да има желания ефект върху тях.

Защо не мога да ползвам уреда върху кожа с тен?

Не използвайте уреда върху тъмна кожа или след излагане на слънце. Тъмната кожа, особено след излагане на слънце, съдържа голямо количество от пигмента меланин. Това се отнася за всички типове и цветове кожа, включително и за тези, които не изглежда бързо да придобиват тен. Наличието на голямо количество меланин излага кожата на повишен риск от негативни последици при използването на уреда, вкл. изгаряния, мехури и промяна в цвета на кожата (хипер- или хипопигментация).

Дългото използване на уреда вредно ли е за кожата?

Използването на светлинна и лазерна енергия в естетичната медицина е документирано в продължение на 15 години от експерти. Няма докладвани странични ефекти или вреди в резултат на дългосрочна употреба на уреди, използващи светлинна и лазерна енергия.

12. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ



Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране, в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Уредът отговаря на изискванията на приложимите европейски директиви.



Уредът има двойна защита и отговаря на защитен клас 2 устройство.



DANGER

Никога не използвайте този уред в близост до вода – опасност от токов удар!



Дръжте този уред далеч от очите си!



Не използвайте този уред след продължителни слънчеви бани и върху кожа с тен!



Пазете този удар от влага!

13. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта. Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Веуегер не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.