

Ръководство на потребителя за инфрачервен масажор Beurer MG 100



1. ВКЛЮЧЕНО В ОПАКОВКАТА

- 1 бр. инфрачервен масажор Beurer MG 100
- 2 бр. взаимно заменими приставки
- 1 бр. инструкции за употреба

2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА

- Масажът се препоръчва като подходящо лечение при множество проблеми. Освен че повишава общото благосъстояние, той е полезен и при мускулни болки, мускулно напрежение, нарушено кръвообращение и чувство на умора.
- Този масажор трябва да се използва само върху хора за масаж на тялото.

3. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Уредът е само за лична употреба и не е предназначен за медицински или търговски цели.
- Уредът може да се използва от деца над 8 г. и хора с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит или знания само под надзор или след като са били инструктирани за безопасното използване на уреда и са напълно наясно с произтичащите от това рискове при употреба.
- Не бива деца да играят с този уред.
- Ако деца използват или почистват уреда те трябва да са в присъствието на възрастен.
- Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се смени от оторизиран техник. Ако не може да се смени, целият уред трябва да бъде изхвърлен.


- Уредът става много горещ по време на работа. Ако сте чувствителни към топлина трябва да го използвате с повишено внимание.
- Уверете се, че движещите се части на уреда могат да се движат свободно по всяко време.
- Уверете се, че косата ви не може да се заплете в устройството.
- Не слагайте и заклещвайте никоя част от тялото си, най-вече пръстите си между подвижните масажни елементи на уреда.
- Преди употреба прочетете тези инструкции внимателно – в противен случай може да пострадате в следствие на неправилна употреба на този уред. Ако дадете този уред на някой друг, моля предайте им и тези инструкции за употреба.
- Не използвайте уреда за повече от 20 минути, за да не прегрее. Масажорът трябва да изстине поне 15 минути преди да го използвате отново.
- Този уред не е заместител на лекарска помощ. Предназначен е за употреба върху отделни части на тялото у дома.
- Моля консултирайте се с вашия лекар преди употреба на този уред, ако не сте сигурни, че той е подходящ за вас.
- Задължително се консултирайте с вашия лекар, ако имате пейсмейкър и не използвайте уреда в зоната на гърдите.
- Не използвайте този уред в следните случаи:
 - Върху подута, изгорена или разранена кожа;
 - Никога не масажирате кости, стави, гръбнак и глава.
 - Върху лицето (очите), върху гърлото си (ларинкса) или върху други чувствителни части на тялото;
 - Ако сте бременна;
 - Докато спите или след прием на алкохол или болкоуспокояващи;
 - При хора с дискова херния или други гръбначни или прешлени проблеми;
- Консултирайте се с лекар преди да използвате този уред:
 - Ако страдате от следните заболявания/симптоми: обикновена настинка, придружена от треска; разширени вени; тромбоза; флебит; жълтеница; диабет; заболявания на нервната система (например ишиас) или остри възпаления;
- Използвайте устройството само по предназначение и по начина, посочен в настоящите инструкции за употреба. Всяка форма на неправилна употреба може да бъде опасна. Производителят не

носи отговорност за щети в резултат на неправилна или небрежна употреба.

- Не използвайте този уред точно преди сън – ефектът му може да бъде прекалено стимулиращ и да попречи на лесното ви заспиване.
- Дръжте опаковката на този уред далеч от обсега на деца.
- Никога не използвайте уреда върху животни.
- Преди да свържете устройството към електрическата мрежа, проверете дали местното мрежово напрежение съответства с посоченото напрежение на уреда – риск от токов удар!
- Не използвайте уреда при видими следи от повреда – риск от токов удар.
- Никога не използвайте уреда по време на буря – риск от токов удар!
- Ако по време на употреба възникнат повреди незабавно изключете уреда и го извадете от електрическата мрежа.
- В никакъв случай не дърпайте кабела и не носете уреда като го държите за кабела – риск от токов удар!
- Дръжте кабела далеч от горещи повърхности!
- Веднага след употреба вадете уреда от тока.
- Не използвайте устройството в близост до вода или във влажни помещения – риск от токов удар! Не мокрете уреда и кабела му.
- Ако в уреда попадне вода потърсете оторизиран техник преди да използвате уреда отново – риск от токов удар!
- Преди всяка употреба проверявайте уреда и кабела за следи от повреда. Ако установите следи от повреда не използвайте уреда. Потърсете помощ от оторизиран техник.
- Не използвайте други масажни глави, освен препоръчаните от производителя.
- Пипайте уреда и кабела му само със сухи ръце, в сухи стаи, никога в баня, във вана, в сауна или под душа. Никога не използвайте уреда навън.
- Не поправяйте уреда сами. Поправки трябва да се извършват само от оторизиран технически персонал. В противен случай гаранцията на уреда става невалидна.
- Никога не оставяйте уреда включен без надзор, особено в случаите, когато има деца наблизо!
- Не покривайте уреда с нищо (например одеяла или възглавници).
- Винаги изключвайте уреда след употреба и преди чистене и го вадете от електрическото захранване.

4. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

- A. Бутон ВКЛ/ИЗКЛ
- B. Скорост/Регулиране на скоростта на масаж
- C. Програми/Избор на различни програми за масаж
- D. Топлина/Инфрачервено затопляне
- E. Старт/Започване на програма
- F. Дисплей на масажна скорост
- G. Масажна програма
- H. Допълнителна дръжка
- I. Масажна повърхност с инфрачервено затопляне
- J. Взаимно заменими масажни приставки

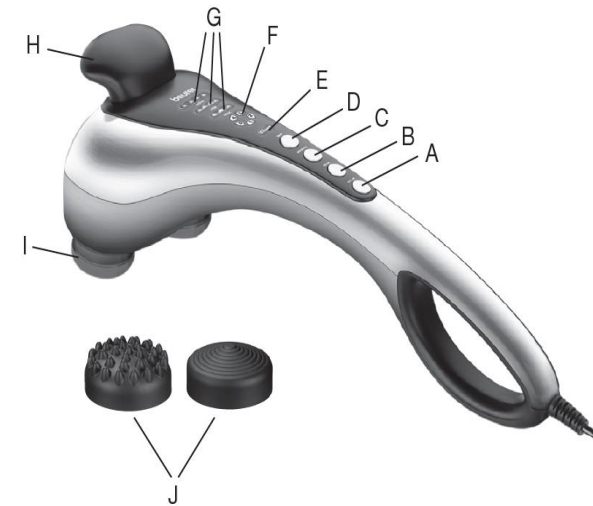

5. РАБОТА С УРЕДА

- Махнете всички опаковки от уреда. Уверете се, че няма видими следи от повреда върху уреда и частите му.
- Включете уреда в контакта, но преди това задължително се уверете, че е изключен. Уверете, че не може да се спънете в кабела.
- Включете уреда с бутон ВКЛ/ИЗКЛ и стартовата масажна програма ще започне.
- Чрез бутон Програма може да изберете една от трите масажни програми:
 - Релакс: Масаж на вълни; релаксиращо действие.
 - Жизнен: Жив и пулсиращ масаж.
 - Активен: Проникващ и пулсиращ масаж.
- Може да включите инфрачервената топлина чрез бутон Топлина по време на всяка една от програмите.
- Движете уреда с две ръце върху участъка на тялото, който искате да масажирате. Може да сте в право, седнало или легнало положение. Натискайте уреда повече или по-малко в зависимост от личните си предпочитания.
- Не масажирайте даден участък повече от три минути. Преместете уреда на друго място върху тялото си.

- Не използвайте уреда за повече от 20 минути, за да не прегрее. Извадете го от тока и го оставете да изстине преди да го използвате отново.
- Уредът се изключва автоматично след период от 20 минути с цел защита от прегряване.
- Масажът трябва да е приятен и релаксиращ през цялото време. Ако изпитате болка или дискомфорт сменете позицията на уреда или спрете да го използвате.

6. ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

- Изключвайте уреда преди всяко почистване и го вадете от тока. Уверете се, че уредът е напълно изстинал преди да го почистите.
- Използвайте мека леко влажна кърпа, за да почистите уреда, а след това го подсушете.
- Уредът трябва да е напълно сух преди да го използвате отново. Никога не допускайте вода да влезе в уреда и никога не го мокрете.
- Съхранявайте уреда на хладно и сухо място, далеч от обсега на деца. Препоръчваме да го съхранявате в оригиналната му опаковка.

7. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ



Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Отнесете го в пункт за събиране или рециклиране, в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Уредът отговаря на приложимите европейски и национални директиви.



Изхвърлете опаковката по начин, опазващ околната среда.

8. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта. Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.

2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Веуегер не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за уреда ще намерите на www.polycomp.bg.