

Ръководство на потребителя за 3D шиациу масажор Beurer MG 151

1. ВКЛЮЧЕНО В ОПАКОВКАТА

- 1 бр. шиациу масажор Beurer MG 151
- 1 бр. захранващ адаптер
- 1 бр. инструкции за употреба

2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА

- Шиациу е форма на масаж на тялото, разработена в Япония преди около 100 години. Тя се основава на идеята, че в човешкото тяло има система от енергийни канали (меридианната система).
- Целта на шиациу масажа е да подобрява физическото, емоционалното и психическото състояние на човека. За да стане това пречките в енергийните канали трябва да бъдат премахнати и саморегулиращата се способност на тялото трябва да бъде стимулирана.
- Шиациу терапията постига това чрез прилагане на натиск чрез плавни движения по протежение на енергийните канали (меридиани).
- Въртящите се масажни глави в този уред имитират движенията на мачкане и натиск, които се използват в Шиациу масажите.
- Чрез този електронен масажор може да получите успокояващ и ефективен масаж у дома.
- Масажите могат да бъдат релаксиращи или стимулиращи и да ви помогнат в случаите на напрежение и болки в ставите и мускулите. Устройството предлага мощен, интензивен масаж за шията, раменете и бедрата.
- Масажор има следните предимства:
 - Лесен е за работа
 - Завъртане на масажните глави по посока на часовниковата стрелка и обратно
 - 3 степени на бързина на работа
 - Функция за затопляне и светлина

3. ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Уредът е предназначен за употреба само върху хора в зоните на врата, гърба, рамената и бедрата. Той не е заместител на лекарска помощ.


- Ако не сте сигурни, че този уред е подходящ за вас, моля консултирайте се със своя лекар.
- Не трябва да използвате този масажор в следните случаи:
 - върху животни;
 - при промени, предизвикани от гръбначни заболявания или наранявания (напр. дискова херния, открити рани);
 - ако имате метален имплант;
 - за масаж на сърдечната област при хора с поставен пейсмейкър (консултирайте се с лекар преди да използвате уреда върху други зони на тялото, ако имате пейсмейкър);
 - върху подута, изгорена, възпалена или повредена кожа или части на тялото;
 - при наличие на разкъсани рани, капиляри, разширени вени, акне, купероза, херпес или други кожни заболявания;
 - при бременност;
 - върху лицето (очите), ларинкса или други чувствителни зони на тялото;
 - за масаж на ходилата;
 - по време на сън;
 - след приемане на вещества, които забавят реакциите (болкоуспокоителни, алкохол и др.);
 - върху кожа, където сте сложили крем за затопляне;
 - в автомобил;
- Консултирайте се с лекар преди да използвате уреда в следните случаи:
 - ако страдате от някакво заболяване или се възстановявате от операция в горната част на тялото;
 - ако имате поставен пейсмейкър или имплант;
 - при тромбози, диабет или болки с неустановен характер.
- Уредът има топла повърхност. Ако сте чувствителни към топлина трябва да го използвате с повишено внимание.
- Уредът е само за лична употреба на закрито и не е предназначен за медицински или търговски цели.
- Този уред не е заместител на медицинската помощ.
- Уредът може да се използва от деца над 8-годишна възраст и от хора с намалени физически, сензорни или умствени способности само под надзор и след инструктаж за опасностите от употреба.
- Не бива деца да играят с този уред.
- Ако деца използват или почистват уреда те трябва да са в присъствието на възрастен.

- Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се смени от оторизиран техник. Ако не може да се смени, целият уред трябва да бъде изхвърлен.
- Не слагайте никакви предмети в отворите на устройството или в подвижните му части. Уверете се, че движещите се части могат да се движат свободно по всяко време.
- Използвайте устройството само по предназначение и по начина, посочен в настоящите инструкции за употреба. Всяка форма на неправилна употреба може да бъде опасна. Производителят не носи отговорност за щети в резултат на неправилна или небрежна употреба.
- В никакъв случай не отваряйте или ремонтирате уреда сами, тъй като перфектната му работа вече не може да бъде гарантирана. Всеки опит за самостоятелна поправка прави гаранцията невалидна.
- Уредът и кабелът му трябва да се ремонтират само от оторизиран технически персонал.
- Използвайте само оригиналното захранване, спазвайки посочения волтаж.
- Преди употреба прочетете тези инструкции внимателно – в противен случай може да пострадате в следствие на неправилна употреба на този уред. Ако дадете този уред на някой друг, моля предайте им и тези инструкции за употреба.
- Дръжте опаковката на уреда далеч от обсега на деца – риск от задушаване!
- Не използвайте уреда, ако той или някоя от частите му са видимо повредени.
- Не използвайте уреда по време на гръмотевична буря.
- При повреда изключете уреда от бутона, а след това и от електрическата мрежа.
- Не изключвайте уреда от контакта като дърпате захранващия кабел.
- Не носете уреда за захранващия кабел.
- Пазете кабела от горещи повърхности, остри предмети, нараняване, прегъване и усукване.
- Уверете се, че уредът, превключвателят, захранването и кабелът нямат досег с вода, пара или други течности.
- Използвайте уреда само на закрито – в сухи помещения, като го пипате само с напълно сухи ръце.
- Ако уредът падне във вода не го вадете преди да изключите кабела от електрическата мрежа.

- Не огъвайте или прегъвайте кабела.
- Не изпускайте уреда и го пазете от удари и други повреди.
- Не отваряйте ципа на уреда. Той е сложен само по технически производствени причини.
- Не използвайте уреда под завивки и възглавници.
- Не използвайте уреда в близост до леснозапалими вещества.
- Винаги изключвайте уреда след употреба и преди чистене и го вадете от електрическото захранване.
- Не сядайте или стъпвайте върху движещите се части с цялата си тежест.
- Не поставяйте предмети върху уреда.

4. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

1. 8 X 3D масажни глави (4 масажни глави с подгряване и осветление), които се въртят по двойки
2. Панел за управление
3.  ВКЛ/ИЗКЛ
4. Бутон  за въртене на масажните глави по посока на часовниковата стрелка и обратно
5. Бутон  (3 нива на сила на работа)
6. Бутон  за подгряване
7. Дръжки
8. Захранващ адаптер
9. Кабел (кабелът е закрепен от страни)

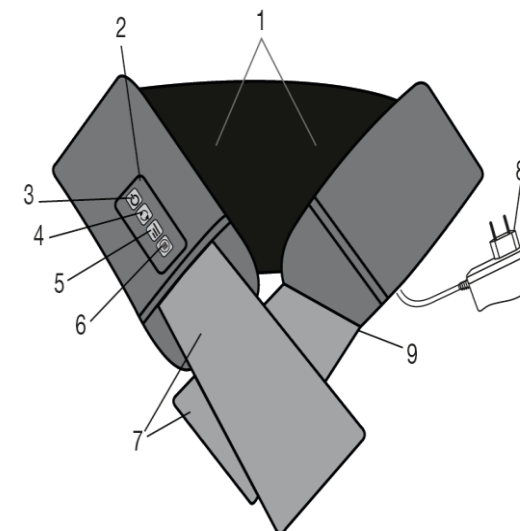

5. ПОДГОТОВКА ЗА УПОТРЕБА

- Разопакувайте уреда.
- Проверете уреда, захранването и кабелите за повреди.
- Свържете захранването към уреда.
- Свържете уреда към електрическата мрежа.

6. УПОТРЕБА

- Включете уреда от бутона . Масажните глави започват да се въртят. Може да изберете посоката на въртенето им чрез бутон .
- Ако искате да включите затоплянето натиснете бутон . Ако искате да го изключите – натиснете бутон  отново.
- Чрез бутон  изберете силата на масажа – уредът винаги започва работа на най-ниската степен на работа.
- Масажът трябва да е приятен и релаксиращ. Ако почувствате болка или дискомфорт по време на употреба спрете масажа или намалете натиска върху кожата.
- Изключете уреда от бутона .
- Не използвайте уреда за масаж повече от 15 минути. Използването на уреда за по-дълго време може да стимулира прекалено мускулите и да предизвика напрежение вместо отпускане.
- Уредът се изключва автоматично след като минат 15 минути.
- Този уред се изключва автоматично след 15 минути с цел защита от прегряване. Ако уредът се изключи, моля оставете го да се охлади преди да го използвате отново.

7. НАЧИНИ ЗА МАСАЖИРАНЕ

- I. Масаж на врат:
- Сложете масажора на врата си.
 - Окажете желанието от вас натиск върху врата си чрез дръжките.




- II. Масаж на рамене:
- Сложете масажора на раменете си.
 - Окажете желанието от вас натиск върху раменете си чрез дръжките.



- III. Масаж на гръб (зоната между раменете):

- Поставете масажора между раменете си по оказания начин.
 - Окажете желанието от вас натиск между раменете си чрез дръжките.
- IV. Масаж на гръб (долна част):
- Сложете масажора малко над бедрата си по оказания начин.
 - Махнете дясната дръжка и прекарайте масажора през ремъка на лявата дръжка.
 - Затворете закопчалката.

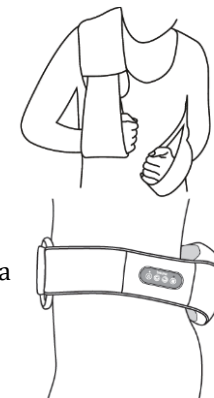

8. ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

- Преди почистване изключете уреда от бутона и от електрическата мрежа.
- Не допускайте влизането на вода или друг вид течност в уреда.
- Почиствайте леки замърсявания с кърпа или гъба, навлажнена с малко течен миеш препарат за деликатни тъкани. Не използвайте разтворители.
- Не използвайте уреда преди да е напълно изсъхнал.
- Ако няма да използвате уреда дълго време, съхранявайте го в оригиналната опаковка на сухо място.

9. ВЪЗНИКВАНЕ НА ГРЕШКИ

Проблем	Причина	Решение
Масажиращите глави се движат бавно.	Тежестта върху тях е прекалено голяма.	Освободете масажиращите глави.
Масажиращите глави не се движат.	Уредът не е включен в ел. контакт.	Свържете уреда към контакт и го включете от бутона.
	Уредът не е включен.	Включете уреда в контакта, а после от бутона.

10. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ



Поради екологични съображения не изхвърляйте устройството в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете устройството в пункт за събиране или рециклиране.

Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).

 Уредът е в съответствие с изискванията на Директива 93/42/ЕИО.

 Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.

 Не използвайте този уред навън.

 Уредът се изнася в Руската федерация и в Общността на независимите държави.

11. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта. Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Веуег не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.