

# Ръководство на потребителя за масажираща седалка Beurer MG 206

## 1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА

Шиаци е форма на масаж на тялото, разработена в Япония преди около 100 години. Тя се основава на идеи, вкоренени в традиционната китайска медицина, по-специално на меридианната система, т.е. пътеките в човешкото тяло, по които се пренася енергията.

Целта на шиаци масажът е да подобрява физическото, емоционалното и психическото състояние на човека. За да стане това, енергийните блокове и пречките в меридианите трябва да бъдат разрушени и да бъде стимулирана саморегулиращата се способност на тялото.

Масажиращите глави в шиаци масажора имитират натиска и техниката с месене при шиаци масажа. Този уред с подвижни масажиращи глави осигурява мощен и интензивен дълбок масаж на целия гръб. Трябва да поставите масажиращата седалка върху подходяща седалка.

Уредът е само за лична употреба и не е предназначен за медицински или търговски цели.

Не трябва да използвате масажиращата седалка:

- при промени, предизвикани от гръбначни заболявания или наранявания (напр. дискова херния, открити рани);
- при бременност;
- по време на сън;
- в автомобил;
- върху животни;
- по време на извършване на дейности, при които ненадейна реакция би била опасна;
- при приемане на вещества, които забавят реакциите (болкоуспокоителни, алкохол и др.);
- повече от 15 минути (поради риск от прегряване). Оставете уреда да се охлади поне 15 минути преди да го използвате отново.

Не използвайте подгриващата функция на уреда, ако не се чувствате добре.

Консултирайте се с лекар преди да използвате уреда:

- ако страдате от някакво заболяване или се възстановявате от операция в горната част на тялото;


- ако имате поставен пейсмейкър или имплант;
- при тромбози, диабет или болка с неустановен характер.

## 2. ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Уредът може да се използва от деца над 8-годишна възраст и хора с намалени физически, сензорни или умствени способности само под надзор и след инструктаж за опасностите от употреба.
- Не използвайте уреда, ако е видимо повреден или не функционира правилно.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се смени. Ако това е невъзможно, уредът трябва да се смени.
- Поправки се извършват само от оторизиран технически персонал.
- Не използвайте уреда по време на гръмотевична буря.
- Уверете се, че уредът, превключвателят, захранването и кабелът нямат досег с вода, пара или други течности.
- Използвайте уреда само на закрито – в сухи помещения, като го пипате само с напълно сухи ръце.
- Не подлагайте уреда на удар.
- Не използвайте уреда в близост до леснозапалими вещества.
- Не използвайте уреда докато сте завити, напр. с одеяло.
- Не пъхайте предмети в отворите на уреда или в движещите се части. Движението на движещите се части трябва да е невъзпрепятствано.
- Използвайте уреда само в изправено положение, не го поставяйте хоризонтално на пода.
- Не сядайте или стъпвайте върху движещите се части с цялата си тежест.
- Пазете уреда от високи температури.

## 3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА


Ръчен превключвател

1.  ВКЛ/ИЗКЛ
2. **Timer** (таймер 5-10-15 мин)
3. **A+B** (масаж на цял гръб)
4. **A** (масаж на горната част на гърба)
5. **B** (масаж на долната част на гърба)
6. **Heat** (загриване)
7. **Demo** (демонстрация на функциите)



#### Седалка:

1. Предпазен калъф
2. 4 масажирски глави
3. Ремъци за притягане
4. Ръчен превключвател
5. Торба за съхранение
6. Махач се и перящ се калъф
7. Уши за закачване (отзад)
8. Захранващ кабел

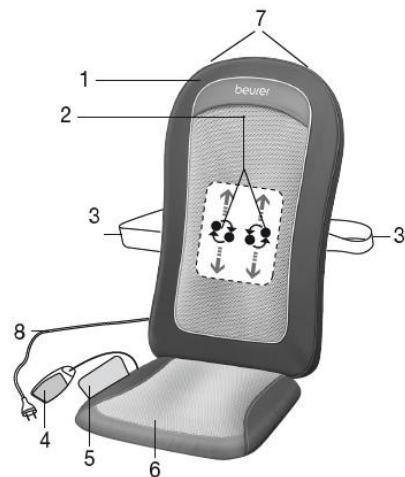

#### 4. ПОДГОТОВКА ЗА УПОТРЕБА

- Притегнете предпазния калъф върху масажирската седалка с помощта на ремъците. Можете да извършвате масаж и без да поставяте предпазния калъф, но ще ви е по-твърдо.
- Поставете седалката в изправено положение върху подходящ стол със седалка и облегалка (стол, диван и др.). Столът трябва да има достатъчно висока облегалка.
- Използвайте ремъците за притягане и ушите, за да закачите седалката към повърхността на стола/дивана и т.н., където е поставена седалката.
- Свържете уреда към електрическата мрежа.

#### 5. УПОТРЕБА

Внимателно подпрете гърба си на масажирското устройство. Уверете се, че сте заели удобна позиция преди постепенно да пренесете тежестта си върху уреда. Масажът трябва винаги да бъде приятен и релаксиращ.

- Внимавайте да не заклещите някоя част от тялото си, особено пръстите, между движещите се елементи или крепежните им елементи в уреда.
- Седнете удобно в изправено положение върху седалката. Уверете се, че сте позиционирани централно, за да могат масажирските глави да се движат наляво и надясно от гръбначния ви стълб.
- Включете масажора от бутон . Изберете желаната зона на масаж с бутони **A+B/A/B**. Светлинният индикатор показва избраната зона.
- Можете да включите загряващата функция от бутон **Heat**.

- Масажирските глави започват движение от стартовата позиция в долната част на гърба и се движат нагоре и надолу в избраната зона на масаж. Не е възможен масаж само в една точка.
- Автоматичната функция за изключване се активира при избор на зона за масажирване и е зададена на 15 минути. Можете да изберете настройки между 5, 10 или 15 минути от **Timer** бутона. Обърнете внимание, че промяната на таймера предизвиква отброяване отначало. За да избегнете прегряване на уреда, изберете максималната продължителност на масажа в началото на масажа, а не я променяйте по време на масажирване.
- Не използвайте уреда за масаж повече от 15 минути и след това го оставете да изстине. Използването на уреда за по-дълго време може да стимулира прекалено мускулите и да предизвика напрежение вместо отпускане. Масажът може да бъде прекратен по всяко време чрез натискане на бутон . Моля, обърнете внимание, че при изключване масажирските глави първо се връщат в изходна позиция в лумбалната област. Това се показва от мигащия индикатор. След достигане на тази позиция уредът се изключва.
- Не изключвайте уреда от електрическата мрежа по време на работа. Изключвайте го само след като масажирските глави се преместят в изходна позиция.

#### 6. ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

- Изключете уреда преди почистване.
- Не допускайте влизането на вода или друг вид течност в уреда.
- Почиствайте леки замърсявания с кърпа или гъба, навлажнена с малко течен миещ препарат за деликатни тъкани. Не използвайте разтворители.
- Свалящият се калъф може да се пере в перална машина на 40°C. Обърнете внимание на символите на етикета.
- Не използвайте уреда преди да е напълно изсъхнал.
- Ако няма да използвате уреда дълго време, съхранявайте го в оригиналната опаковка на сухо място. Можете да го закачите и в гардероб на закачалка като използвате ушите за закачване на задната страна на уреда.

#### 7. ВЪЗНИКВАНЕ НА ГРЕШКИ

Проблем	Причина	Решение
Масажирските глави се движат бавно.	Товарът е прекалено голям.	Намалете контактното налягане на главата.

Масажиращите глави се движат само в долната или горната зона.	Активиран е масаж само за ограничена зона.	Натиснете <b>A+B/A/B</b> , за да смените зоната на масаж.
Масажиращите глави не се движат.	Уредът не е включен в ел. контакт.	Свържете уреда към контакт и го включете от бутона.
	Уредът не е включен.	Включете уреда в контакта, после от бутона и изберете зона за масажирание.
	Включена е защитата срещу прегряване, уредът е повреден.	Свържете се с оторизиран сервиз.

## 8. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ



Поради екологични съображения не изхвърляйте устройството в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете устройството в пункт за събиране или рециклиране.

Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Уредът е в съответствие с изискванията на Директива 93/42/ЕИО.



Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.

## 9. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта. Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
  - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
  - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
  - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.

❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).

4. Веугер не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за продукта ще намерите на [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg).