

Ръководство на потребителя за инфрачервен масажор Beurer MG 70



1. ВКЛЮЧЕНО В ОПАКОВКАТА

- 1 бр. инфрачервен масажор
- 2 бр. взаимно заменими приставки
- 1 бр. инструкции за употреба


2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Този уред е предназначен за масажирание на хора.
- Уредът е само за лична употреба и не е предназначен за медицински или търговски цели.
- Уредът може да се използва от деца над 8 г. и хора с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит или знания само под надзор или след като са били инструктирани за безопасното използване на уреда и са напълно наясно с произтичащите от това рискове при употреба.
- Не бива деца да играят с този уред.
- Ако деца използват или почистват уреда те трябва да са в присъствието на възрастен.
- Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се смени от оторизиран техник. Ако не може да се смени, целият уред трябва да бъде изхвърлен.
- Не слагайте никакви предмети в отворите на устройството или в подвижните му части. Уверете се, че движещите се части могат да се движат свободно по всяко време.
- Внимавайте да не заклепите пръстите или друга част на тялото си в масажната глава.
- Уредът става много горещ по време на работа. Ако сте чувствителни към топлина трябва да го използвате с повишено внимание.

- Преди да свържете устройството към електрическата мрежа, проверете дали местното мрежово напрежение съответства с посоченото напрежение на уреда – риск от токов удар!
- Използвайте устройството само по предназначение и по начина, посочен в настоящите инструкции за употреба. Всяка форма на неправилна употреба може да бъде опасна. Производителят не носи отговорност за щети в резултат на неправилна или небрежна употреба.
- Преди употреба прочетете тези инструкции внимателно – в противен случай може да пострадате в следствие на неправилна употреба на този уред. Ако дадете този уред на някой друг, моля предайте им и тези инструкции за употреба.
- Не използвайте уреда за повече от 20 минути, за да не прегрее. Масажорът трябва да изстине преди да го използвате отново.
- Този уред не е заместител на лекарска помощ. Предназначен е за употреба върху отделни части на тялото у дома.
- Моля консултирайте се с вашия лекар преди употреба на този уред, ако не сте сигурни, че той е подходящ за вас.
- Задължително се консултирайте с вашия лекар, ако имате пейсмейкър и **не** използвайте уреда в зоната на гърдите.
- Не използвайте този уред в следните случаи:
 - Върху животни;
 - Върху подута, изгорена или разранена кожа;
 - Никога не масажирайте кости, стави, гръбнак и глава.
- Ако страдате от следните заболявания/симптоми: обикновена настинка, придружена от треска, разширени вени, тромбоза, флебит, жълтеница, диабет, заболявания на нервната система (например ишиас) или остри възпаления се консултирайте с лекар преди да използвате уреда. Същото важи, ако сте бременна.
- Не дръжте този уред в леглото си – никога не заспивайте докато го използвате!
- Дръжте опаковката на този уред далеч от обсега на деца.
- Не използвайте уреда при видими следи от повреда върху него или кабела му – риск от токов удар.
- Никога не използвайте уреда по време на буря – риск от токов удар!
- Ако по време на употреба възникнат повреди незабавно изключете уреда и го извадете от електрическата мрежа.
- В никакъв случай не дърпайте кабела и не носете уреда като го държите за кабела – риск от токов удар!

- Веднага след употреба вадете уреда от тока.
- Никога не мокрете уреда освен, когато го почиствате с влажна кърпа.
- Не използвайте устройството в близост до вода или във влажни помещения – риск от токов удар! Не мокрете уреда и кабела му.
- Пипайте уреда и кабела му само със сухи ръце, в сухи стаи, никога в баня, във вана, в сауна или под душа. Никога не използвайте уреда навън.
- Ако уреда падне във вода по време на употреба не бъркайте във водата, за да го извадите! Първо го извадете от електрическото захранване – риск от токов удар!
- Ако в уреда попадне вода потърсете оторизиран техник преди да използвате уреда отново – риск от токов удар!
- Преди всяка употреба проверявайте уреда и кабела за следи от повреда. Ако установите следи от повреда не използвайте уреда. Потърсете помощ от оторизиран техник.
- Не използвайте други масажни глави, освен препоръчаните от производителя.
- Внимавайте косата ви да не попада близо до уреда. Ако е необходимо носете мрежа за коса, когато използвате този уред.
- Изключвайте и вадете уреда от захранването, когато сменяте крайниците му или махате или слагате дръжката му.
- Не поправяйте уреда сами. Поправки трябва да се извършват само от оторизиран технически персонал. В противен случай гаранцията на уреда става невалидна.
- Никога не оставяйте уреда включен без надзор, особено в случаите, когато има деца наблизо!
- Деца, възрастни и хора с увреждания трябва да работят с уреда само в присъствието на възрастен.
- Не покривайте уреда с нищо (например одеяла или възглавници).
- Винаги изключвайте уреда след употреба и преди чистене и го вадете от електрическото захранване.

3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

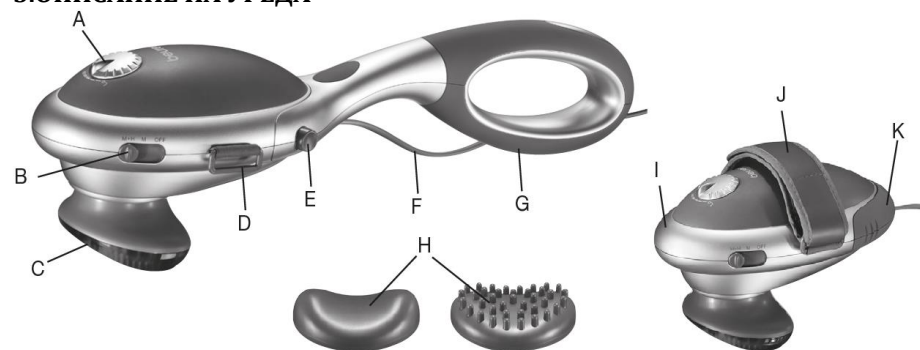

- A. Контролен бутон (безстепенно регулиране на скоростта на масажа)
- B. Плъзгащ се бутон
 - OFF: ИЗКЛ
 - M: Масаж
 - M+N: Масаж и инфрачервена топлина
- C. Масажна повърхност с инфрачервена топлина
- D. Кука за закопчаване на каишка за ръка
- E. Бутони за заключване на дръжка
- F. Кабел за захранване
- G. Махаща се дръжка, която не се пързала при употреба
- H. Взаимно заменими масажни приставки:
 - Мека приставка
 - Приставка с обли подутини
- I. Масажна глава
- J. Каишка за ръка
- K. Капак

4. РАБОТА С УРЕДА

- Изберете дали искате да използвате масажора с дръжка или без. Ако искате да махнете дръжката натиснете силно двата бутона за заключване на дръжката (E) и я дръпнете от него. Сложете капака на масажната глава в задната ѝ част (K). Сложете ръката си в каишката за ръка (J) и я затегнете колкото искате. Масажирайте желанието участващи от тялото си.
- Ако искате да сложите дръжката обратно махнете капака (K) и сложете дръжката на негово място. Кабелът за захранване ще се появи под дръжката.

- Може да използвате този уред с или без масажни приставки.
- Когато искате да използвате уреда на степен „М+Н“ може да използвате и двете масажни приставки, тъй като и двете ограничават инфрачервената топлина, така че да не е прекалено гореща върху кожата ви.
- Използвайте уреда на степен „М“ само когато сте сложили някоя от масажните приставки.
- Уверете се, че уреда е изключен преди да поставите захранващия кабел.
- За да включите уреда плъзнете бутон (В) до позиция М: Масаж или М+Н: Масаж и инфрачервена топлина.
- Нагласете желаната скорост на работа чрез бутон (А) и сложете масажора върху кожата си.
- Движете уреда върху участъка на тялото, който искате да масажирате. Може да сте в право, седнало или легнало положение. Натискайте уреда повече или по-малко в зависимост от личните си предпочитания.
- Не масажирайте даден участък повече от три минути. Преместете уреда на друго място върху тялото си.
- Не използвайте уреда за повече от 20 минути – след това го изключете, извадете го от захранването и го оставете да изстине на безопасно място.
- След като уредът изстине може да продължите да го използвате.

5. ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

- Изключвайте уреда преди всяко почистване и го вадете от тока. Уверете се, че уредът е напълно изстинал преди да го почистите.
- Използвайте мека леко влажна кърпа, за да почистите уреда, а след това го подсушете.
- Уредът трябва да е напълно сух преди да го използвате отново.

6. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ



Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Отнесете го в пункт за събиране или рециклиране, в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Уредът отговаря на приложимите европейски и национални директиви.



Изхвърлете опаковката по начин, опазващ околната среда.



Не използвайте този уред навън.

7. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец илиоторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта.

Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Вeuвгег не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за уреда ще намерите на www.polycomp.bg.