

Ръководство на потребителя за парафинова вана Beurer MP 70



I. ВКЛЮЧЕНО В ДОСТАВКАТА

- 1 бр. парафинова вана Beurer MP 70
- 1 бр. капак
- 1 бр. предпазна решетка
- 2 бр. торбички с парафинов восък по 450 г
- 30 бр. пластмасови торбички за увиване
- 1 бр. Ръководство за употреба

Проверете целостта на опаковката при доставка на уреда и се уверете, че всички компоненти на устройството са налице. Преди употреба се уверете и че няма видими следи от повреда върху уреда или неговите компоненти. Ако имате съмнения, че устройството е с нарушена цялост, моля, свържете се с търговеца, от когото сте го закупили. Премахнете всички опаковъчни материали от устройството преди да го използвате.

Запазете това ръководство за бъдеща употреба. Ако предадете устройството на друг човек, моля, предоставете му и това ръководство за употреба.

II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА

Beurer MP 70 е парафинова вана, предназначена за интензивна грижа и хидратация на кожата на ръцете, стъпалата и лактите. Уредът използва затоплен парафинов восък, който подхранва сухата, груба и уморена кожа в дълбочина, като я прави осезаемо по-мека, по-гладка и еластична. Благодарение на топлинния ефект се подобрява кръвообращението, а кожата става по-възприемчива към последваща козметична грижа. Устройството е лесно за употреба, с вграден контрол на температурата, защитна решетка и капак за по-безопасна и хигиенична терапия у дома. Комплектът включва 2 торбички парафинов восък по 450 г и 30 пластмасови торбички за увиване, които задържат топлината след нанасяне. Beurer MP 70 е предназначен изключително за външна употреба върху кожата на хора – ръце, стъпала или лакти.

Устройството трябва да се използва единствено по предназначение и съгласно указанията в това ръководство за употреба. Неправилната употреба може да бъде опасна. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилна или небрежна употреба. Уредът е предназначен само за домашна/лична употреба и не е подходящ за търговски или медицински цели.

III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Противопоказания:

- Не използвайте уреда, ако имате намалена чувствителност към топлина.
- Не използвайте уреда, ако имате сърдечно заболяване, зачервена кожа, възпаления, подуване, чувствителни зони, диабет, открити рани, изгаряния, екзема, псориазис или намалена чувствителност към болка.
- Ако сте бременна, имате здравословни проблеми или страдате от остри възпаления или периферна съдова болест, консултирайте се с лекар преди употреба на уреда.

Основни предупреждения:

- Внимание – опасност от задушаване! Дръжте опаковъчните материали далеч от деца.
- Внимание – опасност от токов удар! Никога не потапяйте уреда във вода или други течности! Никога не докосвайте уред, който е паднал във вода! Първо изключете предпазителя в електрическото табло и след това извадете захранващия щепсел от контакта. След изпускане на устройството във вода, моля, потърсете оторизиран специалист, който да провери правилната работа на устройството.
- Никога не използвайте уреда в близост до вани, мивки, душеве или други предмети, съдържащи вода или други течности.

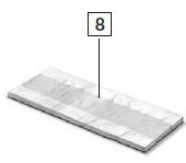
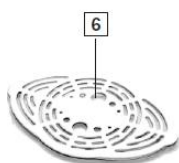
- Уредът не е играчка — не позволявайте на децата да играят с него.
- Уредът може да се използва от деца над 8-годишна възраст, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности, при условие че са под наблюдение и са били инструктирани как да използват устройството безопасно и са напълно наясно с рисковете, свързани с употреба му.
- Децата не разпознават опасностите, свързани с електрическите уреди. Уверете се, че уредът не може да бъде използван от деца без надзор.
- Почистването и поддръжката на този уред не бива да се извършва от деца без родителски контрол.
- Проверявайте състоянието на уреда и захранващия кабел преди всяка употреба. Не използвайте уреда, ако има видими повреди или не функционира правилно. В такъв случай се свържете с търговеца, от когото сте го закупили, или с центъра за обслужване на клиенти.
- Никога не използвайте парафиновата вана без парафинов восък.
- Свалете всички бижута от ръцете и краката си преди употреба.
- Никога не загревайте парафиновия восък в пластмасовата му опаковка. Никога не загревайте парафиновия восък на котлон, на открит пламък или в микровълнова фурна. Загревайте парафиновия восък само в парафиновата вана.
- Преди да включите уреда в електрическата мрежа се уверете, че напрежението съответства на указаното на уреда.
- Не поставяйте уреда върху лесно повредими повърхности, използвайте го само на стабилна и равна основа.
- Дръжте уреда и захранващия кабел далеч от горещи повърхности. Не поставяйте уреда върху други уреди, тъй като горещият парафинов восък може да ги повреди.
- Не използвайте уреда в близост до аерозолни продукти или оборудване, което подава кислород.
- Не използвайте уреда на открито – той е предназначен само за използване в закрити помещения.
- Уверете се, че захранващият кабел не създава опасност от спъване.
- Не използвайте уреда в леглото, по време на сън или ако сте уморени.
- Никога не използвайте уреда под одеяло, хавлии и други.
- Използвайте уреда само с предоставените аксесоари.
- Не пълнете парафиновата вана над маркировката за максимум (MAX).
- Уверете се, че по време на употреба уредът винаги е напълнен с парафинов восък най-малко до маркировката за минимум (MIN).
- Ако парафиновият восък е напълно разтопен, уредът може да е много горещ.
- Преди да потопите ръцете, стъпалата или лактите си в течния парафинов восък, проверете дали температурата е подходяща, като я тествате с вътрешната страна на китката си.
- При възникване на повреда по време на употреба незабавно изключете уреда и извадете щепсела от контакта.
- Дръжте горещия парафинов восък далеч от очите и други части на тялото, чувствителни към топлина.
- Не прилагайте парафиновия восък върху третираната зона за повече от 20 минути.
- Не разклащайте и не местете уреда по време на работа – това може да доведе до изгаряния.
- Ако в парафиновата вана има горещ восък, не добавяйте вода.
- Ако парафиновият восък постоянно ви се струва прекалено горещ или студен при допир, това може да е признак за здравословен проблем. В такъв случай се консултирайте с лекар.
- При болка, раздразнение, дерматит или друг дискомфорт, прекратете процедурата и се консултирайте с лекар.
- Ако устройството е изпускано или е претърпяло други повреди – спрете да го използвате. В противен случай съществува риск от токов удар!

Общи предпазни мерки:

- Изключвайте уреда след употреба, като изваждате щепсела от контакта.
- Никога не изваждайте щепсела от контакта чрез дърпане на кабела или с мокри ръце.
- Не използвайте остри или заострени предмети, за да изваждате блокчето с восък от парафиновата вана – това може да повреди или надраска повърхността.
- Ако няма да използвате уреда за по-дълъг период от време, съхранявайте го на сухо, хладно и защитено от прах място.
- Ако имате въпроси, свързани с употребата на уреда, моля, обърнете се към търговеца, от когото сте го закупили, или към центъра за обслужване на клиенти.

IV. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

1. Парафинова вана
2. Капак
3. Зелена лампичка за работа
4. Регулатор на температурата
5. Червена лампичка за нагряване
6. Предпазна решетка
7. Парафинов восък
8. Пластмасови торбички за увиване



V. УПОТРЕБА

Първи стъпки

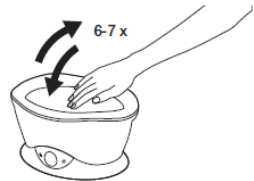
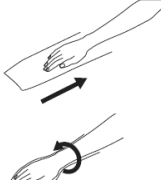
- Отстранете опаковъчния материал. - Уверете се, че всички части са налични (вж. раздел „Включено в доставката“). - Проверете парафиновата вана и захранващия кабел за повреди. - Поставете парафиновата вана върху равна, стабилна и водоустойчива повърхност или маса. - Уверете се, че ваната е празна, преди да я напълните с парафинов восък.	
- Извадете парафиновия восък от пластмасовата му опаковка. - Поставете желаното количество парафинов восък (минимум 0,9 кг, максимум 1,35 кг) в парафиновата вана. За да улесните поставянето, начупете блокчетата восък на по-малки части. Внимание: Уверете се, че преди употреба парафиновата вана винаги е пълна с парафинов восък поне до маркировката за минимум (MIN).	
Включете щепсела в електрически контакт (240 V~, 50/60 Hz). Зеленият индикатор за работа на парафиновата вана ще светне. Уредът вече е включен. Червеният индикатор за загряване също ще светне и ще изгасне едва когато е достигната зададената температура.	
Завъртете температурния регулатор на позиция „горещо“, за да разтопите парафиновия восък.	
Поставете капака върху ваната и изчакайте, докато парафиновият восък се разтопи напълно (приблизително 2–3 часа). Внимание: Когато парафиновата вана е настроена на „горещо“, никога не потапяйте ръце, стъпала или лакти във восъка!	
- Веднага щом парафиновият восък се разтопи напълно, свалете капака. - Завъртете температурния регулатор до маркираната линия между „топло“ и „горещо“. - Поставете включената в комплекта предпазна решетка в течния парафинов восък и изчакайте, докато потъне на дъното на ваната. - Върнете капака върху ваната и изчакайте около един час, докато парафиновият восък се охлади до идеалната температура за работа (60°C).	
Внимание: Стайната температура може да повлияе на мощността на уреда и съответно на температурата на восъка. Преди да потопите ръцете, стъпалата или лактите си в парафиновата вана, проверете температурата на восъка, като я тествате с вътрешната страна на китката си, за да се уверите, че е комфортна. Ако на повърхността на восъка се образува кора, увеличете температурата, като завъртите регулатора по посока на часовниковата стрелка. Ако парафиновият восък ви се струва твърде горещ, намалете температурата, като завъртите регулатора в посока обратно на часовниковата стрелка.	

Употреба

Преди да потопите ръцете, стъпалата или лактите си в парафиновата вана, проверете температурата на восъка, като я тествате с вътрешната страна на китката си, за да се уверите, че е комфортна.

Свалете всички бижута (например часовници, пръстени и други) преди процедурата.

След като сте изпълнили необходимите подготовки, описани в раздел „Първи стъпки“, можете да започнете използването на уреда. За да започнете процедурата, изпълнете следните стъпки:

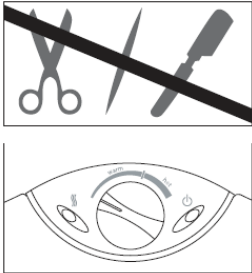
- Преди процедурата препоръчваме да нанесете лосион с ланолинова основа върху зоните, които ще се третират. Това ще помогне за постигане на по-добър резултат и ще улесни отстраняването на парафиновия восък след това. Внимание: Когато използвате парафиновата вана за стъпалата, правете го само в седнало положение. Никога не стъпвайте във ваната. - Потопете за кратко зоната, която ще се третира (ръка, стъпало или лакът), в течния парафинов восък за 1–2 секунди. Извадете я и изчакайте за кратко, докато восъкът се втвърди. По време на този процес не движете третираната зона, за да може восъкът да се втвърди правилно.	
Повторете процеса на потапяне и изваждане шест до седем пъти, докато върху третираната зона се образуват няколко слоя парафинов восък. Ако по време на процедурата восъкът ви се струва твърде горещ или твърде студен, регулирайте температурата, като завъртите температурния регулатор по или обратно на часовниковата стрелка, в зависимост от желаната настройка.	
Сега поставете пластмасова торбичка върху третираната зона, притиснете я към парафиновия восък и завийте края, за да се затвори. Оставете торбичката да престои 20 минути. Внимание: Ако поставите пластмасови торбички на стъпалата, не се разхождайте с тях, тъй като може да се подхлъзнете.	
След изтичане на 20 минути, свалете пластмасовата торбичка заедно със слоевете восък от третираната зона. Изхвърлете торбичката в битовия отпадък – тя не подлежи на повторна употреба.	
След всяка употреба изваждайте предпазната решетка от парафиновата вана.	

VI. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Почистване:

Ако уредът се използва само от един човек, сменяйте парафиновия восък периодично и почиствайте ваната при всяка смяна.

Ако уредът се използва от няколко души, парафиновият восък трябва да се сменя преди всяка процедура по хигиенни съображения.

• Изключете щепсела от контакта. • Извадете предпазната решетка от парафиновата вана. • Оставете парафиновия восък да се втвърди за една нощ.	
Внимание: Не използвайте остри или заострени предмети, за да извадите блока с восък от парафиновата вана – това може да повреди или надраска повърхността на уреда. • Ако парафиновият восък се е втвърдил, натиснете единия му край и го повдигнете, за да го извадите от ваната. Ако блокът с восък не се изважда лесно, настройте регулатора на температурата на „топло“ за около 10 минути. След това изключете уреда от контакта и извадете блока с восък от ваната. • След това подсушете вътрешността на парафиновата вана с чиста кърпа. Внимание: Никога не пълнете ваната с вода, за да я почистите.	
• След почистване съхранявайте парафиновата вана на сухо, хладно и защитено от прах място.	

Ремонти:

- Не ремонтирайте и не модифицирайте устройството сами. В противен случай правилната му работа вече не може да бъде гарантирана.

- Само специализиран персонал може да извършва ремонт на електрически уреди. При никакви обстоятелства не отваряйте и не се опитвайте да ремонтирате устройството сами. Това може да доведе до неправилна работа на уреда и да създаде сериозен риск за безопасността. За ремонт, моля, свържете се с отдел „Обслужване на клиенти“ или с оторизиран търговец. Неспазването на тези указания води до анулиране на гаранцията.

VII. СЪПКИ ПРИ ПРОБЛЕМИ

Проблем	Възможна причина	Решение
Уредът не работи.		За ремонт се обърнете към центъра за обслужване на клиенти или оторизиран търговец.
Лампичката за нагриване/ работа не светва.	Няма захранване.	Включете захранващия адаптер в контакта. Захранващият адаптер е повреден. Свържете се с центъра за обслужване на клиенти или с вашия търговец.
	LED светлините са достигнали края на своя експлоатационен живот/са повредени.	За ремонт се обърнете към центъра за обслужване на клиенти или оторизиран търговец.
Втвърден восък в парафиновата вана.	Маслото в парафиновия восък е изчерпано.	Сменете парафиновия восък. Използвайте само оригинален парафинов восък на Beurer.
	Може да се получи при честа употреба.	
	Използва се парафин с по-висока температура на топене.	
Променен цвят на парафиновия восък.	Може да се получи при честа употреба.	Сменете парафиновия восък. Използвайте само оригинален парафинов восък на Beurer.
Парафиновият восък се топи по-бавно от обичайното.	Парафиновият восък е твърде студен.	Съхранявайте парафиновия восък при стайна температура.
	Уредът не работи.	За ремонт се обърнете към центъра за обслужване на клиенти или оторизиран търговец.

VIII. РЕГУЛАТОРНА ПОЛИТИКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Поради екологични съображения не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране. Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). При въпроси относно правилното изхвърляне на устройството, моля, обърнете се към съответните местни власти.



IX. ГАРАНЦИЯ/СЕРВИЗ

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта.

Приложими са следните гаранционни условия:

- Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
- Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
- Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
- Beurer не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Производител: Beurer GmbH

Адрес: Soeflinger Strasse 218

89077 Ulm, Germany

Телефон: +497 313 9890

Имейл: customerservice@beureruk.com

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.