

Ръководство на потребителя за електрическа четка за зъби Beurer SC 50

I. ВКЛЮЧЕНО В ДОСТАВКАТА

- 1 бр. електрическа четка за зъби Beurer SC 50
- 2 бр. глави за четка
- 1 бр. зарядно устройство с USB кабел
- 1 бр. Ръководство за употреба

Проверете целостта на опаковката при доставка и се уверете, че всички компоненти на уреда са налице. Преди употреба огледайте внимателно уреда и неговите части за видими повреди. Ако имате съмнения относно състоянието на устройството, моля, свържете се с търговеца, от когото сте го закупили. Премахнете всички опаковъчни материали от устройството преди да го използвате.

Запазете това ръководство за бъдеща употреба. Ако предадете устройството на друг човек, моля, предоставете му и това ръководство за употреба.

II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА

Тази електрическа четка за зъби е предназначена за ефективно и щадящо почистване на вашите зъби. Тя трябва да се използва единствено по предназначение и съгласно указанията в това ръководство за употреба, за да избегнете злополуки или повреди. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилна или небрежна употреба.

III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ


- Дръжте зарядното устройство и мрежовия адаптер (не е включен в доставката) далеч от вода или други течности.
- Не поставяйте зарядното устройство и мрежовия адаптер (не е включен в доставката) близо до мивка или вана, пълни с вода.
- Внимание – опасност от задушаване! Дръжте опаковъчните материали далеч от деца.
- Устройството не е подходящо за деца под 8 години.
- Уредът може да се използва от деца над 8-годишна възраст, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности, при условие че са под наблюдение, инструктирани са как да използват устройството безопасно и са напълно наясно с рисковете, свързани с неговото използване.
- Уредът не е играчка – не позволявайте на децата да играят с него.
- Почистването и поддръжката на този уред не бива да се извършва от деца без родителски контрол.
- Не използвайте устройството върху животни, включително домашни любимци.
- Ако устройството е повредено или не работи правилно, не го използвайте. В такъв случай се свържете с центъра за обслужване на клиенти.
- Ако захранващият кабел е повреден, трябва да изхвърлите зарядното устройство.
- Използвайте само предоставеното зарядно устройство.
- За да заредите устройството, използвайте само мрежов адаптер  (не е включен в доставката), чийто изход отговаря на безопасно ниско напрежение от 5 V и максимум 1 A.
- Не дърпайте захранващия кабел или самото устройство, за да извадите мрежовия адаптер от контакта.
- При никакви обстоятелства не отваряйте и не се опитвайте да ремонтирате устройството сами. Това може да доведе до неправилна работа на уреда и да създаде сериозен риск за безопасността. Неспазването на тези указания води до анулиране на гаранцията.

Относно батериите:

- Ако кожата или очите ви влязат в контакт с течност от батерия, измийте веднага засегнатите зони обилно с вода и потърсете лекарска помощ.
- Ако дадена батерия протече, използвайте предпазни ръкавици и почистете отделението за батерия със суха кърпа.
- Поставяйте батериите по правилен начин, като съблюдавате (+) и (-) поляритета на батериите.
- Никога не правете късо съединение между батериите и контактите на отделението за батерии.
- Никога не загрявайте, не отваряйте, не мачкайте, не деформирайте, не модифицирайте, не запечатвайте и не удряйте батериите.
- Пазете батериите от пряка слънчева светлина, високи температури, топлина, дъжд и вода.
- **Риск от експлозия!** Никога не изхвърляйте батерии в огън.
- Батериите трябва да бъдат правилно заредени преди употреба. Винаги спазвайте указанията на производителя и информацията в това ръководство за употреба относно правилното зареждане.
- Заредете напълно батерията преди първата употреба.
- За да осигурите възможно най-дълъг живот на батерията, зареждайте я напълно поне 2 пъти годишно.

IV. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

1. Глава на четката
2. Бутон за вкл./изкл./смяна на режим
3. LC дисплей:
 - 5 режима: почистване, избелване, чувствителност, полиране, грижа за венците;
 - Емотикони;
 - Ниво на батерията;
 - Заклучване при транспортиране.
4. Светлинен пръстен
Контрол на натиска
 Червен светлинен пръстен: прекалено силен натиск.
 Бял светлинен пръстен: натискът е подходящ.
5. Индукционно зарядно устройство

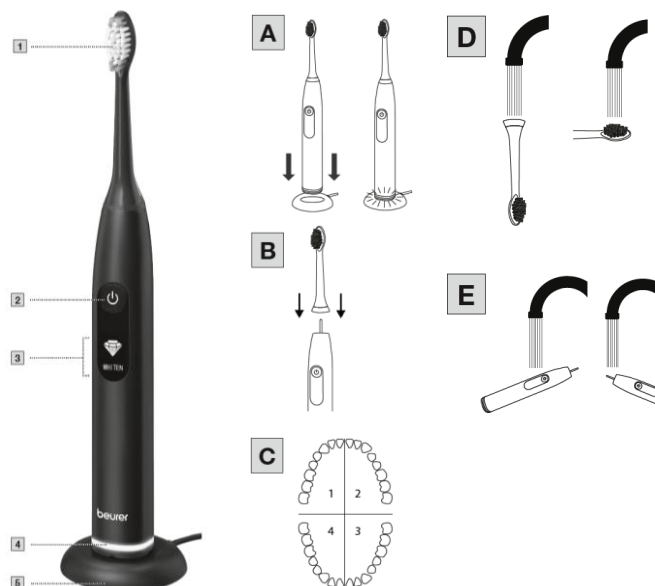

V. УПОТРЕБА

Първи стъпки

Зареждане на електрическата четка за зъби [A]

Напълно зарядете електрическата четка за зъби преди първата ѝ употреба. За целта следвайте следните стъпки:

1. Свържете USB зареждащия кабел на индукционното зарядно устройство [5] към USB порт или към подходящ мрежов адаптер с USB връзка [] и клас на защита 2 [] (не е включен в доставката), след което го включете в електрически контакт.
2. Поставете електрическата четка за зъби върху индукционното зарядно устройство [5]. Индикаторът за нивото на батерията ще се появи на LC дисплея [3], докато устройството се зарежда.

Поставяне на главата на четката за зъби [B]

Поставете главата на четката [1] върху устройството отгоре, докато не щракне на място. Уверете се, че главата на четката [1] е насочена в същата посока като бутона за вкл./изкл./смяна на режим [2].

Индикаторни влакна

Индикаторните влакна избледняват с времето в зависимост от начина на използване на устройството, като по този начин показват кога е най-подходящият момент за смяна на главата на четката [1].

Бележка: препоръчваме да сменяте главата на четката [1] на всеки 3 месеца. Ако влакната на главата на четката са износени или разпокъсани, може да се наложи да я сменяте по-често.

Първоначална употреба

1. За да включите електрическата четка за зъби, натиснете за кратко бутона за вкл./изкл./смяна на режим [2]. Електрическата четка за зъби прави кратка пауза на всеки 30 секунди, за да ви напомни да почиствате всичките 4 квадранта на челюстта за едно и също време [C]. Електрическата четка за зъби има автоматичен таймер и вибрира два пъти след 2 минути. Четката се изключва автоматично след 6 минути.

Бележка: Електрическата четка за зъби има сензор за натиск. Когато натиснете прекалено силно главата на четката [1] върху зъбите или венците по време на използване, светлинният пръстен [4] ще започне да свети в червено.

2. Изберете желанния режим, като натиснете за кратко бутона за вкл./изкл./смяна на режим [2]. Текущо избраният режим се показва съответно на LC дисплея [3]. Налични са следните режими:

„Ежедневно почистване“	За ежедневно почистване.
„Избелване“	За по-бели зъби.
„Чувствителност“	За нежно почистване.
„Полиране“	За премахване на повърхностни петна.
„Грижа за венците“	За поддържане на здравето на венците.

3. За да прекратите сесията по-рано, натиснете за кратко бутона за вкл./изкл./смяна на режим [2]. Ако оптималното време за почистване от 2 минути не е достигнато, на LC дисплея [3] ще се появи тъжна емотикона. Натиснете отново за кратко бутона за вкл./изкл./смяна на режим [2], за да продължите почистването на зъбите в предварително избрания режим. Таймерът ще продължи да отчита от мястото, на което е бил спрял.

Заклучване при транспортиране

Заклучването при транспортиране предпазва устройството от неволно включване (например по време на пътуване, когато се носи в куфар).

1. За да активирате заключването при транспортиране, натиснете и задръжте бутона за вкл./изкл./смяна на режим [2] за 5 секунди. Символът за заключване при транспортиране ще свети. По време на активиране символът мига. След като заключването при транспортиране бъде активирано, символът ще свети постоянно за кратко време.

2. Ако натиснете за кратко бутона за вкл./изкл./смяна на режим [2], докато устройството е заключено, символът за заключване при транспортиране също ще светне.
3. За да деактивирате заключването при транспортиране, отново натиснете и задръжте бутона за вкл./изкл./смяна на режим [2] за 5 секунди. Символът мига по време на деактивирането. След като заключването бъде деактивирано, символът изгасва. Устройството се включва.

VI. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Почиствайте устройството и главата на четката [1] след всяка употреба.

За целта следвайте следните стъпки:

1. Издърпайте главата на четката [1] нагоре и я отстранете.
2. Почистете главата на четката [1] под течаща вода. Уверете се, че сте почистили и вътрешната част на главата на четката [1] **D**.
3. Почистете устройството под течаща вода. Не потапяйте устройството във вода. Водата може да проникне в устройството и да го повреди **E**.
4. Редовно почиствайте зарядното устройство [5] с влажна кърпа и леко сапунен разтвор. Не използвайте абразивни почистващи препарати. Дръжте индукционното зарядно устройство [5] и USB кабела с мрежов адаптер далеч от вода.

VII. РЕГУЛАТОРНА ПОЛИТИКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ



Поради екологични съображения не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране.

Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). При въпроси относно правилното изхвърляне на устройството, моля, обърнете се към съответните местни власти.



Празните и напълно изтощени батерии трябва да се изхвърлят в специално предназначени кутии за събиране в пунктове за рециклиране или търговци на електроника. Вие сте задължени по закон да изхвърлите батериите.

Кодовите по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:

Pb = Батерията съдържа олово

Cd = Батерията съдържа кадмий

Hg = Батерията съдържа живак

Премахване на батерията

1. За да отворите електрическата четка за зъби, използвайте долната част на индукционно зарядно устройство [5].
2. Поставете долната част на четката за зъби върху въртящия се шаблон в долната част на индукционното зарядно устройство.
3. Приложете лек натиск и завъртете обратно на часовниковата стрелка. Капачето на дъното на четката за зъби вече може да бъде свалено.
4. Отворете долната част на четката за зъби.
5. Издърпайте вътрешната част на четката за зъби.
6. Извадете батерията от вътрешната част.
7. Изхвърлете батерията отделно в специално обозначените контейнери за събиране, в пунктове за рециклиране или в магазини за електроника.

VIII. ГАРАНЦИЯ/СЕРВИЗ

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта.

Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Beurer не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Производител: Beurer GmbH

Адрес: Soeflinger Strasse 218

89077 Ulm, Germany

Телефон: +497 313 9890

Имейл: customerservice@beureruk.com

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.