

# Ръководство на потребителя за електрическа четка за зъби Beurer TB 50

## I. Включено в комплекта:

- 1 бр. електрическа четка за зъби
- 1 бр. глава за четка
- 1 бр. зарядно
- 1 бр. USB кабел за зареждане с мрежов адаптер
- 1 бр. инструкции за употреба

*\* Прочетете тези инструкции внимателно и ги запазете за по-нататъшна употреба. Уверете се, че ако дадете това устройство на друг ще им предадете и тези инструкции за употреба.*

*\* Проверете целостта на опаковката при доставка на уреда и се уверете, че всички компоненти на устройството са налице. Преди употреба се уверете, че няма видими следи от повреда върху уреда или неговите компоненти. Ако имате съмнения, че устройството е с нарушена цялост, моля свържете се с търговеца от когото сте го закупили.*

## II. Предназначение на уреда:

Използвайте устройството само за почистване на зъби на хора. Никога не използвайте уреда върху животни! Устройството не е подходящо за деца под 8 години. Устройството е предназначено само за целта, описана в тези инструкции за употреба.

Производителят не носи отговорност за щети в резултат на неправилна или невнимателна употреба.

## III. Полезни съвети и инструкции за безопасност:

- Дръжте зарядното устройство и хранващия адаптер далеч от вода или други течности.
- Не поставяйте зарядното устройство или хранващия адаптер близо до мивка или вана, пълна с вода.
- Това устройство не трябва да се използва от деца под 12-годишна възраст и от хора с намалени физически, сетивни (напр. намалена чувствителност към болка) или умствени умения или липса на опит или знания, освен ако не са под надзор или са инструктирани как да използват устройството безопасно и са напълно наясно с произтичащите рискове от употребата му.
- Този уред не е играчка и децата не бива да играят с него.
- Почистването и поддръжката на устройството не бива да се извършват от деца, освен ако не са под надзор.
- Не използвайте устройството, ако по него има признаци на повреда или ако то не функционира правилно.
- Ако хранващият кабел е прекъснат, трябва да изхвърлите зарядното устройство.
- Използвайте само USB кабел за зареждане с мрежов адаптер и съответното зарядно устройство, доставено с вашето устройство.
- Не дърпайте хранващия кабел или устройството, за да изключите щепсела на хранващата част от контакта.
- Щепселът на хранващата част трябва да работи само с указаното на него напрежение.
- При никакви обстоятелства не трябва да отваряте или ремонтирате устройството сами, в противен случай правилната функционалност вече не може да бъде гарантирана. Неспазването на тези насоки ще анулира гаранцията.

### Относно батериите:

- Ако кожата или очите ви влязат в контакт с течност от батерия, измийте веднага с вода и потърсете лекар.
- Опасност от задавяне! Пазете батерията далече от деца. Поглъщането на батерията може да бъде изключително опасно.
- Ако батерия протече трябва да си сложите защитни ръкавици и да изхвърлите устройството.
- Не излагайте батерията на високи температури.
- Не хвърляйте батерията в огън – опасност от експлозия!
- Използвайте зарядни само уточнени от производителя.
- Зареждайте устройството само с предоставения в комплект с него адаптер за зареждане.

- За да постигнете максимален експлоатационен живот на батерията трябва да я зареждате напълно поне два пъти на година.
- Винаги изключвайте устройството преди зареждане.
- Батериите трябва да бъдат заредени правилно преди употреба. Винаги спазвайте инструкциите на производителя за правилното зареждане на батериите.

#### IV. Описание на устройството:

##### 1. Глава на четка

##### 2. Бутон за Вкл./Изкл./Режим

Кратко натискане: Включва и изключва устройството

По-дълго натискане: Сменя режима на работа

##### 3. Индикатор на режим

##### 4. Кръгъл светлинен индикатор

Управление на натиск:

Червен цвят: Натискът е твърде висок

Бял цвят: Натискът е ОК


Индикатор за заряд на батерията:

Кръгът мига в бяло → Нисък заряд на батерията

Кръгът пулсира в бял цвят → Батерията се зарежда

Кръгът свети в бяло постоянно → Батерията е заредена

##### 5. Стойка за зареждане

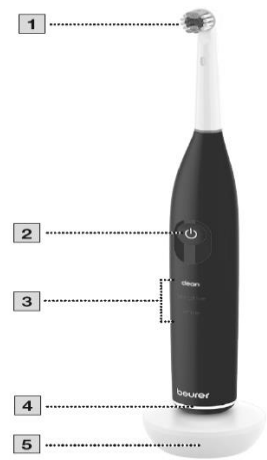

#### V. Употреба:


##### Подготовка за употреба

##### Зареждане на четката:

Заредете напълно електрическата четка за зъби преди първа употреба.

За да направите това, продължете както следва:


1. Свържете USB кабела за зареждане към стойката за зареждане (5). Включете USB кабела за зареждане в USB порт или в подходящ контакт с помощта на предоставения в комплекта адаптер.
2. Поставете електрическата четка за зъби върху стойката за зареждане (5). По време на процеса на зареждане кръглият светлинен индикатор (4) мига в бяло (фигура А). Веднага след като електрическата четка за зъби е напълно заредена, кръглият светлинен индикатор (4) ще започне да свети в бяло постоянно.

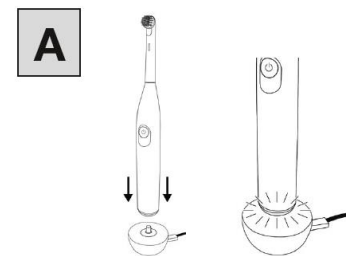

##### Поставяне на главата на четката за зъби:

Поставете главата на четката (1) върху устройството отгоре докато щракне на място (фигура В). Уверете се, че главата на четката (1) сочи в същата посока като бутонът за Вкл./Изкл./ Режим (2).

Препоръчваме да смените четката главата на четката (1) след 3 месеца. Ако власинки на самата глава на четката са износени или протрити, може да се наложи да подмените главата по-рано.

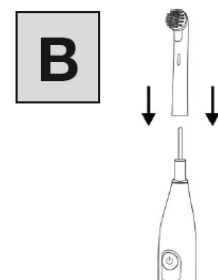


##### Първоначална употреба:

1. За да включите електрическата четка за зъби, натиснете за кратко бутона Вкл./Изкл./ Режим (2). Електрическата четка за зъби вибрира за кратко на всеки 30 секунди, за да ви напомни да почистите всичките 4 челюстни квадранта за еднакво време (фигура С). Електрическата четка за зъби има автоматичен таймер и вибрира три пъти след 2 минути. Четката за зъби се изключва автоматично след 6 минути.

**Бележка:** Електрическата четка за зъби разполага със сензор за натиск. Веднага щом натиснете главата на четката (1) твърде силно върху вашите зъби или венци по време на употреба, кръглият светлинен индикатор (4) ще светне в червено (Фигура D).

2. Изберете желанието от вас режим, като натиснете и задържите бутона Вкл./Изкл./ Режим (2). Избраният режим ще светне в Индикатора за режим (3). Налични са следните режими:

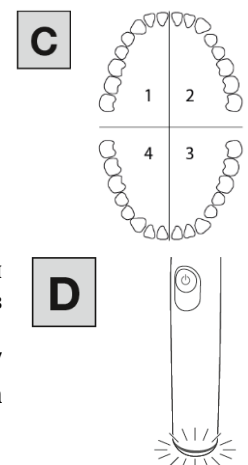

„Чист“ → За цялостно и пълно почистване

„Чувствителен“ → За нежно и щадящо венците почистване

„Бял“ → Почистване за естествено избелване на зъбите

3. За да отмените преждевременно дадена сесия, натиснете за кратко бутона Вкл./Изкл./ Режим (2).
4. Почистете устройството, както е описано в глава „Почистване и поддръжка“.


#### VI. Почистване и поддръжка:

Почиствайте устройството и главата на четката (1) след всяка употреба.


За да направите това, моля:

1. Издърпайте главата на четката (1) нагоре и настрани.
2. Почистете главата на четката (1) под течаща вода (фигура E).  
Не забравяйте да почистите и вътрешността на главата на четката (1).
3. Почистете устройството под течаща вода (фигура F). Не потапяйте устройството във вода. Водата може да влезе в устройството и да го повреди.
4. Редовно почиствайте стойката за зареждане (5) с влажна кърпа и мек сапунен разтвор. Не използвайте никакви абразивни почистващи продукти. Дръжте стойката за зареждане (5) и USB кабела за зареждане с мрежовия адаптер далеч от вода.

E

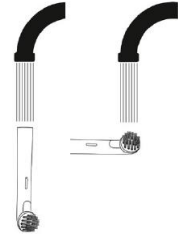

F

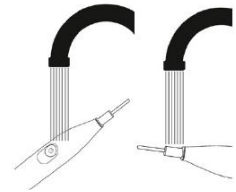

#### VII. Регулаторна информация:



Това устройство отговаря на всички приложими към него европейски директиви и наредби.



Поради екологични съображения не изхвърляйте устройството в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете устройството в пункт за събиране или рециклиране.

Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.



Не изхвърляйте батериите заедно с битовите си отпадъци. Винаги изхвърляйте батериите в специално обозначените пунктове за рециклиране. Кодовете по-долу са отпечатани на батериите, които съдържат вредни вещества:

Pb = Батерията съдържа олово/ Cd = Батерията съдържа кадмий/ Hg = Батерията съдържа живак

#### VIII. Гаранционни условия:

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта. Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
  - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
  - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
  - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
  - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Veeger не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за продукта ще намерите на [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg).